


Fachkatalog für Zahnbehandlung Kleintier

pro
veterinary experts



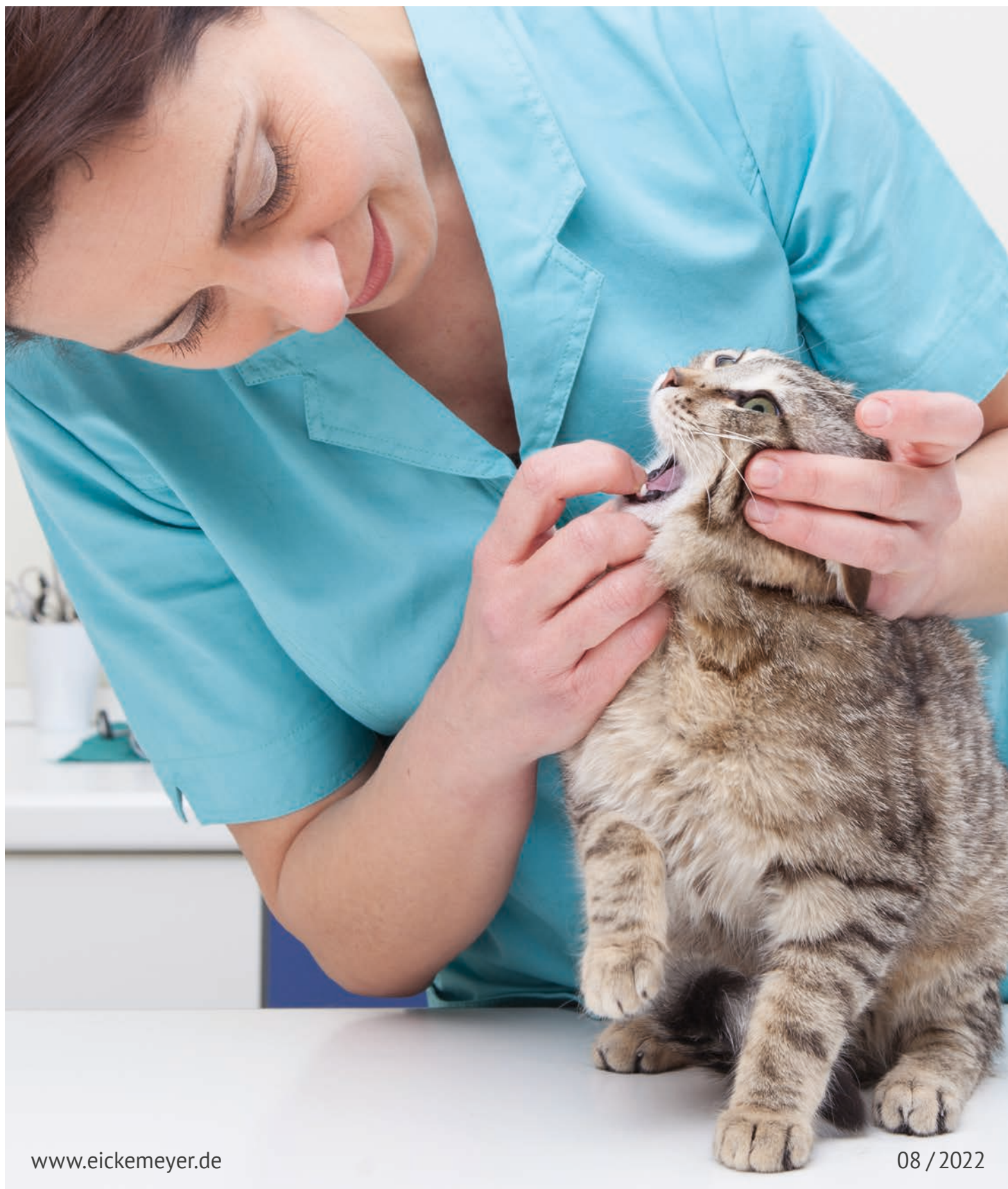

176535

HiRay DENTAL Dentales Röntgengerät

Das präzise, zuverlässige und ergonomische HiRay DENTAL Hochfrequenz-Röntgengerät bietet anwenderfreundliche Funktionen, beste Leistung und exzellente Bildqualität. Kurze Expositionszeiten ermöglichen eine signifikante Dosisreduktion für den Patienten sowie scharfe, wiederholbare und qualitativ hochwertige Röntgenaufnahmen.

- Einfach, intuitiv und sicher
- Niedrigere Dosis bei hoher Auflösung
- Durchdachtes Design und kurze Belichtungszeit helfen den Arbeitsablauf zu beschleunigen
- Stabile Arme garantieren eine präzise Linearbewegung, um das Risiko, dass sich die Röhre während der Aufnahme bewegt, zu reduzieren
- Erzeugt durch einen kleinen Fokus Bilder von höchster Qualität, egal ob Filme, Speicherfolien oder digitale Sensoren verwendet werden

Technische Daten

- Fokus: 0,4 mm
- Belichtungszeit: 0,01 – 2 Sek.
- Hohe Spannung: 60 – 65 – 70 kVp
- Anodenstrom: 5 mA
- Minimaler Fokus-Hautabstand: 200 mm
- Gesamtfilterung: > 2 mm Al eq.
- Bestrahlter Bereich: bei 200 Ø 55 mm
- Spannungsversorgung: 120 – 230 V (±10 %)

Art. Nr.

176530	HiRay DENTAL – Wandmodell • Maximale Ausladung: ca. 1,98 m • Montage bauseits
176535	HiRay DENTAL – Stativmodell • Maximale Ausladung: ca. 1,30 m
S176000	Installation & Einweisung



176550

Tragbares Dentalröntgengerät

Das tragbare Dentalröntgengerät besticht durch neueste digitale Technologien und ist ideal für dentale Röntgenaufnahmen sowie für Detailaufnahmen von Extremitäten in der Orthopädie geeignet. Das Gerät kombiniert die höchsten Spezifikationen tragbarer Röntgeneratoren mit höchsten Sicherheitsmerkmalen, einschließlich einer mit Blei ausgekleideten Röntgenröhre.

- Klein, handlich und leicht (nur 1,5 kg)
- Feste Röhrenspannung: 70 kV
- Fester Röhrenstrom: 2 mA
- Variablen Belichtungszeiten von 0,05 – 1,6 Sek.
- Vorprogrammierte Einstellungen für intelligente Belichtung
- 0,4 mm Fokus für scharfe und klare Röntgenbilder
- 2,4" LCD-Display
- Langlebiger Li-Polymer-Akku für bis zu 400 Aufnahmen
- Zur Verwendung mit DR-Sensoren und Speicherfoliensystemen USB-Anschluss zum Anschluss des DigiVet® DR Dental-Röntgensensors (708040)
- Geringe Strahlendosis gewährleistet die Sicherheit von Patienten und Bedienern
- Entspricht nationalen Sicherheitsstandards und -richtlinien
- Lieferung inkl. Fernbedienungsschalter und Stativ
- Maße (in cm): H 17,3 x B 14,0 x T 25,4
- Gewicht: 1,5 kg

Art. Nr.

176550	Tragbares Dentalröntgengerät
17655001	Streustrahlenschutz
176541	Stativ

DigiVet® DR Dental-Röntgensensor

Der DigiVet® DR Dental-Röntgensensor ermöglicht die Aufnahme qualitativ hochwertiger, digitaler Röntgenbilder, die mit Hilfe der leistungsstarken EiVIS Software ohne Zeitverzögerung sofort befundet werden können.

- Hochauflösender CsI Szintillator mit USB-Anschluss
- Abgerundete Ecken für erhöhten Patientenkomfort

Technische Daten

- Aktive Fläche: 34 x 26 mm
- Auflösung: 20 lp/mm
- Pixelgröße: 20 x 20 Micron
- Pixelzahl: 2,21 Mio.
- Maße (in mm): L 42 x B 31 x H 5 bzw. 13 (Kabel)

EiVIS Dental – Intraorale Röntgensoftware

- Speichert und bearbeitet digitale Dentalröntgenaufnahmen
- Einbindung von Sensor- oder Speicherfoliensystemen verschiedenster Hersteller
- Zahn Charts zur Zuordnung von Röntgenbildern

Art. Nr.

708040 DigiVet® DR Dental-Röntgensensor (Größe 2)



Ansicht 2

EiVIS – EICKEMEYER® Veterinary Imaging Software

Eine Software für alle Bilddaten!

EiVIS ist eine herstellerübergreifende Software zur Akquirierung, Übernahme, Anzeige, Bearbeitung und Verwaltung jeglicher patientenbezogener Bilddaten. EiVIS unterstützt Geräteanbindungen verschiedenster Hersteller in einer Software. Sie sparen sich somit das Arbeiten mit unterschiedlichen Softwareprodukten und haben all Ihre Bilddaten immer übersichtlich in nur einem Programm.

Die Akquirierung der Bilddaten kann – je nach gewähltem EiVIS Modul – aus allen erdenklichen digitalen Bildquellen und Röntgensystemen erfolgen. Die angebotenen Röntgenmodule unterstützen den Empfang und die Abarbeitung von Röntgenaufträgen u. a. auch per DICOM Worklist.

EiVIS fügt sich effizient in Ihren Arbeitsablauf ein und Sie steuern alle Funktionen mit nur wenigen Klicks. Alle Bilddaten sind übersichtlich und chronologisch für Sie aufbereitet und können auf Wunsch auch nach eigenen Kriterien sortiert werden. Umfangreiche Bearbeitungstools geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre digitalen Aufnahmen individuell anzupassen, um Ihre Diagnose zu erleichtern und schneller die passende Therapie für Ihre Patienten zu finden.


Das Programm unterstützt Sie zudem auch beim Versenden Ihrer Bilddateien, Sie können Ihre Daten somit einfach, schnell und sicher mit Ihren Partnern teilen.

Alle EiVIS Module beinhalten bis zu 10 Arbeitsplätze und eine Schnittstelle für die Anbindung an Ihr Praxisverwaltungssystem.

EiVIS ist auf die Bedürfnisse Ihrer Praxis zugeschnitten und steht für Effizienz, Geschwindigkeit, Performance und Komfort.

Art. Nr.

- 709001 EiVIS Dental
- Speichert und bearbeitet digitale Dentalröntgenaufnahmen
 - Einbindung von Sensor- oder Speicherfoliensystemen verschiedenster Hersteller
 - Zahn Charts zur Zuordnung von Röntgenbildern

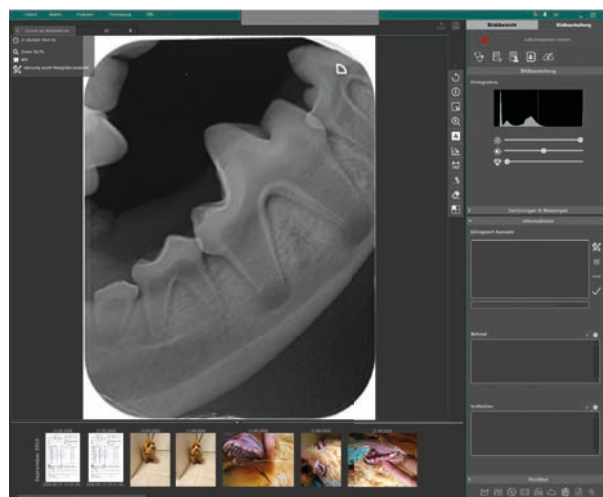

Beispiel EiVIS Software



Anwendungsbeispiel

DigiVet® CR PLUS Dental Reader

Der kompakte, benutzerfreundliche dentale CR Reader für schnelle und qualitativ hochwertige digitale Röntgenbilder – jetzt mit höherer Auflösung.

Der einfach zu bedienende DigiVet® CR PLUS Dental Reader liefert jetzt eine noch brillantere Bildqualität. Mit einer Auflösung von 21 lp/mm lässt das digitale Speicherfoliensystem keine Wünsche mehr offen.

Der automatisierte Magneteinzug mit „Push-and-go“-Funktion macht die Erstellung von Bildern kinderleicht – auch bei ungeübten Anwendern. Im Starter-Paket sind die 2 wichtigsten Speicherfolien-Größen für das dentale Röntgen in der Tierarztpraxis, u. a. die originalgetreue Speicherfolie der Größe 4c, enthalten. Lästiges Zusammenfügen von mit Größe 3 aufgenommenen Bildern entfällt damit. Durch die integrierte Löschfunktion wird ein zusätzliches Gerät zum Löschen von Speicherfolien vor einer Wiederverwendung überflüssig.

- Kann aufgrund seines kompakten Formates selbst in kleinste Tierarztpraxen und Behandlungsräume integriert werden
- Vorhandene Röntgengeräte können verwendet werden
- Mit der Bildvorschau auf dem Bildschirm des Readers kann die Bildqualität leicht überprüft werden
- Einfache Anwendung: der Benutzer wird Schritt für Schritt auf dem Bildschirm durch das bildgebende Verfahren geführt – aufwändige Schulungen entfallen
- Selbstkalibrierung für Stabilität und Langzeit-Performance

Benutzerfreundliche Bildgebungssoftware

Mit der inkludierten Bildgebungssoftware werden die Erfassung und Verwaltung von Bildern optimiert. Die benutzerfreundliche Software unterstützt wirtschaftliche Workflows in Tierarztpraxen und erfordert wenig Einarbeitung: Um sicherzustellen, dass die Scans den richtigen Positionen zugeordnet werden, wählt der Bediener einfach den betreffenden Zahn auf dem Zahnschema der Software aus.

Lieferumfang

- DigiVet® CR PLUS Dental Reader
- Starter-Set Speicherfolien:
4x Größe 2 (31 x 41 mm), 1x Größe 4c (48 x 54 mm)
- 100 Hygiene-Hüllen Größe 2
- 100 Hygiene-Hüllen Größe 4c
- DigiVet® Dental Vet Imaging Software Paket
inklusive DICOM Modalitäten (Send/Retrieve)

Art. Nr.

708035	DigiVet® CR PLUS Dental Reader
70803122	12 Monate Garantie (optional)
70803123	24 Monate Garantie (optional)
70803124	36 Monate Garantie (optional)
70803125	48 Monate Garantie (optional)
S176000	Installation & Einweisung

Zubehör für DigiVet® CR PLUS Dental Reader

Art. Nr.	
70803101	Starter-Set Speicherfolien, bestehend aus: • 4x Größe 2 (31 x 41 mm) • 1x Größe 4c (48 x 54 mm)
70803102	Speicherfolien-Set Größe 0 • 4x Größe 0 (22 x 31 mm)
70803103	Speicherfolien-Set Größe 1 • 4x Größe 1 (24 x 40 mm)
70803104	Speicherfolien-Set Größe 2 • 4x Größe 2 (31 x 41 mm)
70803105	Speicherfolien-Set Größe 3 • 4x Größe 3 (27 x 54 mm)
70803106	Speicherfolie Größe 4c • 1x Größe 4c (48 x 54 mm)
E70803106	Aufbewahrungsbehälter für Speicherfolien
70803115	Schutzfolien Größe 0 • Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen • Packung mit 100 Stück
70803116	Schutzfolien Größe 1 • Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen • Packung mit 100 Stück
70803117	Schutzfolien Größe 2 • Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen • Packung mit 100 Stück
70803118	Schutzfolien Größe 2 • Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen • Packung mit 300 Stück
70803119	Schutzfolien Größe 3 • Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen • Packung mit 100 Stück
70803120	Schutzfolien Größe 4c • Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen • Packung mit 100 Stück
70803108	Hygiene-Hüllen Größe 0 • Packung mit 100 Stück
70803109	Hygiene-Hüllen Größe 1 • Packung mit 100 Stück
70803110	Hygiene-Hüllen Größe 2 • Packung mit 100 Stück
70803111	Hygiene-Hüllen Größe 2 • Packung mit 300 Stück
70803112	Hygiene-Hüllen Größe 3 • Packung mit 100 Stück
70803113	Hygiene-Hüllen Größe 4c • Packung mit 100 Stück
E70803101	Stromadapter
E70803104	Stromkabel
E70803102	USB 2.0 Verbindungskabel
E70803103	Netzwerkkabel • CAT.5E FTB (Cross-Over) • Länge: 2 m
E70803107	Ersatzdongle für Softwarelizenz



70803104



E70803106



70803113



174023



174022

Profident Fahrbare Dentaleinheit

Die Zahnbehandlungseinheiten Profident sind die Summe vieler langjähriger Erfahrungen auf dem Gebiet der Zahnheilkunde und bieten ein breites Anwendungsspektrum. Ob in der Allgemeinpraxis oder für Zahnspezialisten: die Profident Dentaleinheiten bieten ein klares und modernes Design, verbunden mit hoher Mobilität und geringem Platzbedarf.

Das Stativ ist höhenverstellbar (71 – 100 cm) und die Handstücke ergonomisch günstig angeordnet. Alle Profident Dentaleinheiten verfügen über die automatische Aktivierung der Hand- und Winkelstücke. Die Dreiwegespritze (Wasser/Luft/Spray) verfügt über eine drehbare, leicht abnehmbare und autoklavierbare Spritze und erlaubt eine gründliche Lavage der Mundhöhle. Zusätzlich verfügt die Profident Dentaleinheit über einen Druckauslass.

Das Low Speed Handstück ist mit einer Drehkupplung ausgestattet und ermöglicht einen schnellen Wechsel der rotierenden Aufsätze. Das High Speed Handstück (Turbine) mit bis zu 400.000 U/min verfügt über eine Druckkopfmechanik zum schnellen Bohrerwechsel und eine regulierbare Wasserkühlung.

Mit dem Fußschalter können die Handstücke und die (teilweise optionale) Wasserkühlung an- bzw. ausgeschaltet werden.

Der optional erhältliche Kompressor (flüsterleise) lässt sich auf Wunsch in das Stativ der Profident Dentaleinheit integrieren.

Art. Nr.

174023	Profident Fahrbare Dentaleinheit
174022	Optionale Wasserkühlung für Low Speed Handstück, bestehend aus: - Low Speed Luftmotor - Mit innenliegender Wasserkühlung (bis 20.000 U/min, für entsprechend konfigurierte Dentaleinheit) - Low Speed Geradeaushandstück S-Max 1:1, mit innenliegender Wasserkühlung (für entsprechend konfigurierte Dentaleinheit) - Low Speed Winkelstück 1:1 - Für Low Speed Motor mit Wasserkühlung (für entsprechend konfigurierte Dentaleinheit)
174045	Ersatzflasche für Dentaleinheiten Inhalt: 750 ml
17404502	Ersatzflasche für Dentaleinheiten Inhalt: 2 Liter

Eickemeyer®

Einkaufen leicht gemacht!
www.eickemeyer.de



© Eric Issele – shutterstock.com

Profident PLUS Fahrbare Dentaleinheit

Die Profident Zahnbehandlungseinheiten sind die Summe vieler langjähriger Erfahrungen auf dem Gebiet der Zahnheilkunde und bieten ein breites Anwendungsspektrum. Ob in der Allgemeinpraxis oder für Zahnspezialisten: die Profident Dentaleinheiten bieten ein klares und modernes Design, verbunden mit hoher Mobilität und geringem Platzbedarf.

Das Stativ ist höhenverstellbar und die Handstücke ergonomisch günstig angeordnet. Alle Profident Dentaleinheiten verfügen über die automatische Aktivierung der Hand- und Winkelstücke. Die Dreiwegespritze (Wasser/Luft/Spray) verfügt über eine drehbare, leicht abnehmbare und autoklavierbare Spritze und erlaubt eine gründliche Lavage der Mundhöhle. Zusätzlich verfügen die Profident Dentaleinheiten über einen Druckauslass.

Das Low Speed Handstück ist mit einer Drehkupplung ausgestattet und ermöglicht einen schnellen Wechsel der rotierenden Aufsätze. Das High Speed Handstück (Turbine) mit bis zu 300.000 U/min verfügt über eine Druckkopfmechanik zum schnellen Bohrerwechsel und eine regulierbare Wasserkühlung.

Der optional erhältliche Kompressor (flüsterleise) lässt sich auf Wunsch in das Stativ der Profident Dentaleinheiten integrieren.

Die Profident PLUS Dentaleinheit verfügt über ein integriertes Piezo-Zahnsteinentfernungsgerät mit hoher Leistung. Einmalig ist auch die im Griff integrierte LED-Beleuchtung. Somit haben Sie stets optimale Lichtverhältnisse.

Alle Funktionen des Zahnsteingerätes lassen sich bequem an der Dentaleinheit regulieren. Darüber hinaus verfügt die Profident PLUS Dentaleinheit über ein mit LED beleuchtetes High Speed Handstück (Turbine). Damit erlaubt das Handstück eine hervorragende Ausleuchtung und führt zu besseren Behandlungsergebnissen.



174024

Art. Nr.

174024	Profident PLUS Fahrbare Dentaleinheit • Zusätzlich mit Piezo-Zahnsteinentfernungsgerät mit LED-Beleuchtung und High Speed Handstück mit LED-Beleuchtung • Maße (in cm): B 52 x H 71 – 100 x T 40
174022	Optionale Wasserkühlung für Low Speed Handstück, bestehend aus: - Low Speed Luftmotor • Mit innenliegender Wasserkühlung (bis 20.000 U/min, für entsprechend konfigurierte Dentaleinheit) - Low Speed Geradeaushandstück S-Max • 1:1, mit innenliegender Wasserkühlung (für entsprechend konfigurierte Dentaleinheit) - Low Speed Winkelstück 1:1 • Für Low Speed Motor mit Wasserkühlung (für entsprechend konfigurierte Dentaleinheit)
17402401	DTE Scaler-Ersatzspitze GD1T • Flach, spitz
17402402	DTE Scaler-Ersatzspitze GD2T • Flach, breit
17402403	DTE Scaler-Ersatzspitze GD3T • Lang, spitz
17402404	DTE Scaler-Ersatzspitze GD4T • Flach, spitz
17402405	DTE Scaler-Ersatzspitze PD1T • Punktförmig
174045	Ersatzflasche für Dentaleinheiten • Inhalt: 750 ml
17404502	Ersatzflasche für Dentaleinheiten • Inhalt: 2 Liter



174022



17402402

17402403

17402405



174010



17401150



17401155



174066



176782



174908



17410601



17410609



17410603



17410604



17410605

Starterset Profident / Profident PLUS

Das wichtigste Zubehör für Profident/Profident PLUS in einem Set.

Art. Nr.

174004	Set komplett, bestehend aus:
174010	Universal-Pflegespray für rotierende Instrumente • Zur Pflege von Hand- und Winkelstücken • Ohne Schraubadapter • Inhalt: 500 ml
17401150	Schraubadapter • Für Hand- und Winkelstücke
17401155	Sprühdüse E-Type • Zubehör zu Universal-Pflegespray (174010) • Für Low Speed Handstücke
174066	Kunststoff-Polieraufsatz mit Gummi-Polierkelch • Für gerades Handstück • Max. Drehzahl 3.000 U/min • Zum Einmalgebrauch • Packung mit 100 Stück
176782	EICKEMEYER® Polierpaste • Zum Polieren der Zähne nach der Zahnsteinentfernung • Mittlere Körnung • Geschmack: Pfefferminze • Inhalt: 200 g
174908	Reinigungsbürstchen für Dental-Bohrer und -fräser • Zur Reinigung von Dental-Bohrern, Dental-Fräsern etc.
17410601	Rosenbohrer für gerades Handstück ISO23 • Packung mit 2 Stück • Rund
17410609	Rosenbohrer für Turbine ISO23 • Empfohlene Arbeitsdrehzahl: 40.000 – 120.000 U/min • Max. Drehzahl bis 300.000 U/min • Packung mit 5 Stück
17410603	Zahnbohrer 23R010 • Für Turbine • Für Katzen • Spitz zulaufend, abgerundet • Packung mit 5 Stück
17410604	Zahnbohrer 23R012 • Für Turbine • Für Hunde • Spitz zulaufend, abgerundet • Packung mit 5 Stück
17410605	Zahnbohrer 23R016 • Für Turbine • Für mittlere und große Hunde • Spitz zulaufend, abgerundet • Packung mit 5 Stück

Kompressor für Dentaleinheiten

Art. Nr.

- | | |
|----------|--|
| 17430002 | Kompressor für Dentaleinheiten <ul style="list-style-type: none"> • Verwendbar mit allen EICKEMEYER® Dentaleinheiten • Auf das Stativ der Profident/ Profident PLUS montierbar • Leise, ca. 40 dB(A) (wie ein Ventilator) • Wartungsarm • Kompakte Bauweise • Leistungsstark: 340 Watt • 230 V, 8 bar bzw. 116 psi, 37 l/min • 6 l Tankinhalt • Maße (in cm): B 43 x L 45 x T 20 |
| 17404301 | Mikro-Ölfilter <ul style="list-style-type: none"> • Reduziert den Ölgehalt in der Kompressorluft bis auf 0,01 % • Damit Ihre Handstücke länger leben |
| 174051 | Öl für Kompressor für Dentaleinheiten <ul style="list-style-type: none"> • Inhalt: 500 ml |



17430002



17404301

Dental-Turbinenhandstücke

Passend für Profident/Profident PLUS Dentaleinheiten.

Art. Nr.

- | | |
|----------|--|
| 174055 | Dental-Turbinenhandstück <ul style="list-style-type: none"> • Schlüssellos zu spannen (Push Button) • Mit Wasserkühlung für rotierende Instrumente mit bis zu 400.000 U/min • Gute Qualität zum kleinen Preis |
| 17402323 | Dental-Turbinenhandstück mit LED <ul style="list-style-type: none"> • Schlüssellos zu spannen (Push Button) • Mit Wasserkühlung für rotierende Instrumente mit bis zu 480.000 U/min • Mit eingebauter LED-Beleuchtung • Keine Stromversorgung erforderlich, kann einfach auf vorhandene, bestehende Turbinenkupplungen aufgesteckt werden |
| 17405501 | NSK Dental-Turbinenhandstück <ul style="list-style-type: none"> • Schlüssellos zu spannen (Push Button) • Mit Wasserkühlung für rotierende Instrumente mit bis zu 400.000 U/min • Profiqualität von NSK |



174055



17402323



17405501



174061



17406101



17402201



174027



17402202



174026



17402205

Low Speed Handstücke

Passend für Profident (174023) und Profident PLUS (174024).

Art. Nr.

174061	Low Speed Geradeaushandstück mit Luftmotor • 1:1, mit innenliegender Wasserkühlung • Bis 20.000 U/min • Zum Betrieb von Polieraufsätzen und Trennscheiben
17406101	Low Speed Luftmotor • 1:1, mit innenliegender Wasserkühlung • Bis 20.000 U/min • Für entsprechend konfigurierte Dentaleinheit
17402201	NSK Low Speed Luftmotor • Mit innenliegender Wasserkühlung • Bis 22.000 U/min • Für entsprechend konfigurierte Dentaleinheit
174027	Low Speed Geradeaushandstück • 1:1, ohne Luftmotor • Passend zu: Zahnbohrereinheit EICKEMEYER® II (174028), EickSonic PLUS (176880)
17402202	NSK Low Speed Geradeaushandstück S-Max • 1:1, mit innenliegender Wasserkühlung • Bis zu 25.000 U/min • Für entsprechend konfigurierte Dentaleinheit
174026	Low Speed Winkelstück • 1:1, ohne Luftmotor • Mit Druckknopf-Haltesystem • Passend zu: Zahnbohrereinheit EICKEMEYER® II (174028) und EickSonic PLUS (176880)
17402205	NSK Low Speed Winkelstück • 1:1, für Low Speed Motor mit Wasserkühlung • Bis zu 40.000 U/min • Für entsprechend konfigurierte Dentaleinheit

REINIGUNG & PFLEGE

Handstücke Dentaleinheiten

Mit einer regelmäßigen und konsequenten Pflege der Handstücke nach jeder Zahnbehandlung können Sie die volle Funktionalität Ihrer Handstücke beibehalten.

1. Vorbereitung

Entfernen Sie nach jeder Behandlung eines Patienten das Handstück von der Kupplung und nehmen Sie den Bohrer (idealerweise mit einer Pinzette) heraus.

2. Äußere Reinigung der Handstücke / Turbinen

Unmittelbar nach Beendigung der Behandlung ist das Handstück unter warmem, fließendem Wasser zu reinigen (z.B. mit einer Zahnbürste), damit sich kein Schleifstaub oder Speichel festsetzen kann. Die Handstücke nie im Ultraschallbad reinigen!

3. Desinfektion der Handstücke / Turbinen

Die Handstücke können äußerlich und im Spraywasser- / Sprayluftkanal mit Desinfektionsmitteln behandelt werden. Die Handstücke nie in Desinfektionslösung tauchen!

4. Pflege der Handstücke / Turbinen

Sprühen Sie die Handstücke nach jeder Reinigung mit Pflegeöl ein. Mit dem Pflegeöl in den Spraywasser- und Sprayluftkanal der Handstücke jeweils 1 – 2 Sekunden sprühen. Ist die am Kopf austretende Flüssigkeit noch mit Schmutz vermischt, muss der Vorgang wiederholt werden.



Einspritzen von Pflegeöl in den Spraykanal (Pflegeöl Art. Nr. 174010 und Spraykanaladapter Art. Nr. 17401150)



Einspritzen von Pflegeöl in Handstücke mit planem Aufnahmeschaft (Pflegeöl Art. Nr. 174010 und Handstückadapter Art. Nr. 17401155)

5. Pflege der Spannzangen

Die Freigängigkeit der Druckknöpfe ist für die feste Einspannfunktion des Bohrers sehr wichtig. Die Spannzange muss mindestens 1-mal wöchentlich von der Bohrerseite her mit dem Pflegeöl durchgesprüht werden. Verwenden Sie nur einwandfreie Diamantschleifer und Bohrer von namhaften Herstellern. Sind die Bohrerschäfte aus zu weichem Material, kann es bei eventuellem Durchdrehen des Bohrers in der Spannzange zu Abschabungen kommen. Dabei entstehen feine Späne, die sich im Spannsystem festklemmen können. Danach kann der Bohrer ggf. nicht mehr entfernt und das Spannsystem dadurch beschädigt werden.

6. Pflege

Gezieltes Aufbringen von Pflegemitteln auf Gelenke, Schlüsse und Verschraubungen sowie Gleitflächen. Dadurch wird der Reibung von Metall auf Metall und somit der Reibungskorrosion vorgebeugt. Es ist spezielles Instrumentenöl zu verwenden (z.B. Instrumentenöl, Art. Nr. 563707). Die Gängigkeit der Instrumente prüfen. Defekte Instrumente sind auszusondern. Gerne können Sie diese unserem Reparaturservice zusenden. Wir reparieren alle Instrumente. In der Regel lohnt sich die Reparatur.

REGELMÄSSIG ÖLEN FÜR LANGE LEBENSDAUER



174030



174039



Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Absaugungsanlagen von Dentaleinheiten

Art. Nr.	Inhalt
174030	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Absaugung • Zur täglichen Anwendung
174031	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Absaugung • Extra stark • Zur Anwendung einmal pro Woche

Desinfektions- und Shock-Tabletten für Profident / Profident PLUS

- Zur Desinfektion der Wasserleitungen von Profident / Profident PLUS
- Geeignet für Flaschen von 0,7 – 1,0 l Fassungsvermögen
- Blaue Tabletten zur täglichen Reinigung: Lösen Sie bei jeder Befüllung der Wasserflasche Ihrer Profident / Profident PLUS eine blaue Tablette auf, um die Wasserleitungen kontinuierlich zu reinigen.
- Orange Shock-Tablette zur intensiven Reinigung: Lösen Sie die Shock-Tablette einmal im Monat in der Wasserflasche Ihrer Profident / Profident PLUS auf und lassen Sie das Wasser durch das Leitungssystem laufen, bis die Orangefärbung erscheint. Lassen Sie das Wasser über Nacht im Leitungssystem einwirken und entleeren Sie die Flasche vor der nächsten Behandlung.

Art. Nr.	
174039	Desinfektionstabletten für Profident / Profident PLUS • Inhalt: 48 blaue Tabletten + 2 orange Shock-Tabletten

Mobiles Dentalstativ

Macht jeden Tisch zum Zahnbehandlungstisch!
Mit dem mobilen Dentalstativ von EICKEMEYER® wird jeder OP- oder Behandlungstisch zum ergonomischen Zahnbehandlungstisch.

- Zum Ansetzen an OP- und Behandlungstische
- Ergonomische, halbrunde Wanne mit Gitterrost
- Wanne zur Reinigung einfach abnehmbar
- Komplette aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 4 feststellbaren Leichtlaufrollen
- Höhenverstellbar von 75 – 100 cm
- Wannengröße (in cm): B 50 x T 35

Art. Nr.	
605105	Mobiles Dentalstativ

EickSonic II Zahnsteinentfernungsgerät

- Mit beleuchtetem LED-Handstück (abnehmbar)
- Starke Leistung (28 kHz)
- Mit moderner Piezo-Technik
- Stufenlose Leistungsregulierung
- Wasseranschlussschlauch mit Konnektor für 3/8"-Wasserleitung
- Sehr einfache Handhabung
- Kompakte, langlebige Konstruktion
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Inkl. 5 Spitzen (2x flach, breit; 2x flach, spitz; 1x punktförmig)

Art. Nr.

176865	EickSonic II Zahnsteinentfernungsgerät
176871	Scaler-Ersatzspitze G4T (Universalspitze) • Flach, spitz
176872	Scaler-Ersatzspitze G2T (Universalspitze) • Flach, breit
176873	Scaler-Ersatzspitze G1T (Universalspitze) • Flach, spitz
176874	Scaler-Ersatzspitze P1T (Periospitze) • Punktförmig
176878	Scaler-Spitze G3
E176865001	LED-Scaler Handstück (Ersatzteil)



176865


Zahnsteinentfernungsgerät Cocoon Spray

Mit seinem kompakten und robusten Design eignet sich dieses Zahnsteinentfernungsgerät für die meisten routinemäßig durchgeführten Dentalbehandlungen. Mit dem Piezo Scaler lässt sich selbst hartnäckiger Zahnstein mühelos entfernen. Die Wasserkühlung schützt zudem zuverlässig vor einer Erhitzung.

- Steuergerät: selbstkühlender Mikromotor mit außenliegender Wasserversorgung
- 1,6 Ncm Drehmoment, bei Winkelstück-Übersetzung 1:1 stufenlos einstellbar bis 40.000 U/min
- Suprasson Piezo-Ultraschall-Zahnsteinentferner mit Titanschwinger, Frequenz 27 – 32 KHz, mit je 1 Arbeitsspitze Nr. 1 (flach) und 10 P (rund)
- Einstellung der Wassermenge sowie der Leistung über Drehregler
- Komplett mit Zubehör, ohne Winkelstück
- Maße (in cm): L 23 x B 18 x H 10
- Gewicht: 3 kg

Art. Nr.

176860	Zahnsteinentfernungsgerät Cocoon Spray
174038	Low Speed Winkelstück • 1:1, ohne Luftmotor • Mit Wasserkühlung • Passend zu: Cocoon Spray Zahnsteinentfernungsgerät (176860)
176875	Wasserdruckbehälter aus Kunststoff • Schafft einen optimalen Wasserdruck • Durch Befüllen mit destilliertem Wasser schützt es Ihr Zahnsteinentfernungsgerät vor Kalk • Max. 3 bar • Volumen: 5 l
17402401	DTE Scaler-Ersatzspitze GD1T • Flach, spitz
17402402	DTE Scaler-Ersatzspitze GD2T • Flach, breit
17402403	DTE Scaler-Ersatzspitze GD3T • Lang, spitz
17402404	DTE Scaler-Ersatzspitze GD4T • Flach, spitz
17402405	DTE Scaler-Ersatzspitze PD1T • Punktförmig

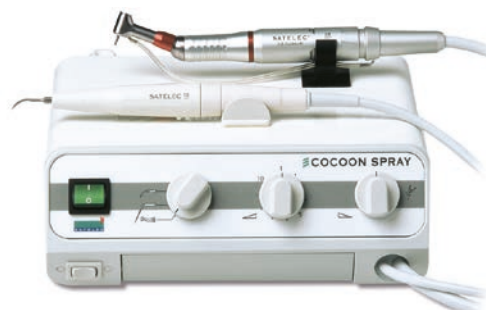

176860



174038



174028



174026



174027



174026



174027



174105



174066



176782



174010



17401150



17401155

Zahnbohrereinheit EICKEMEYER® II mit Fußschalter

- Platzsparender Mikromotor zum Antrieb von Hand- und Winkelstücken für die Zahnbehandlung
- Kompakter, langlebiger Motor
- Leistungsstark
- Stufenlos einstellbare Drehzahl 0 – 35.000 U/min
- Rechts-/Linkslauf
- Wahlweise Hand- oder Fußschalterbetrieb
- Leichter, bequem in der Hand liegender Mikromotor
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
- Lieferung ohne Hand-/Winkelstück

Art. Nr.

174028	Zahnbohrereinheit EICKEMEYER® II mit Fußschalter
174026	Low Speed Winkelstück
174027	Low Speed Geradeaushandstück
E174025001	Mikromotor
E17402802	Halterung für Mikromotor

Kleintier Dental-Starterset für EICKEMEYER® Zahnbohrereinheit II und EickSonic PLUS

Art. Nr.

174002	Set komplett, bestehend aus:
174026	Low Speed Winkelstück • 1:1, ohne Luftmotor • Mit Druckknopf-Haltesystem
174027	Low Speed Geradeaushandstück • 1:1, ohne Luftmotor
174105	Bohrersset für Winkelstück • 11-teiliges Basis-Set für Hunde, Katzen und Kleintiere
174066	Kunststoff-Polieraufsatz mit Gummi-Polierkelch • Für gerades Handstück • Max. Drehzahl 3.000 U/min • Zum Einmalgebrauch • Packung mit 100 Stück
176782	EICKEMEYER® Polierpaste • Zum Polieren der Zähne nach der Zahnsteinentfernung • Mittlere Körnung • Geschmack: Pfefferminze • Inhalt: 200 g
174010	Universal-Pflegespray für rotierende Instrumente • Zur Pflege von Hand- und Winkelstücken • Ohne Schraubadapter • Inhalt: 500 ml
17401150	Schraubadapter • Für Hand- und Winkelstücke
17401155	Sprühdüse E-Type • Zubehör zu Universal-Pflegespray (174010) • Für Low Speed Handstücke

Kunststoff-Polieraufsatz mit Gummi-Polierkelch

Optimale Politur durch oszillierende Bewegung. Dadurch wird auch die Entwicklung von zu großer Hitze am Zahn und das Verformen von Tasthaaren verhindert.

Art. Nr.

- | | |
|--------|--|
| 174066 | Kunststoff-Polieraufsatz mit Gummi-Polierkelch <ul style="list-style-type: none"> • Für gerades Handstück • Max. Drehzahl 3.000 U/min • Zum Einmalgebrauch • Packung mit 100 Stück |
|--------|--|

**Polierkelche mit Winkelstückansatz****Art. Nr.**

- | | |
|--------|--|
| 176787 | Polierkelche mit Winkelstückansatz <ul style="list-style-type: none"> • Packung mit 5 Stück |
|--------|--|

**Wasserdruckbehälter für Zahnsteinentfernungsgeräte**

Schafft einen optimalen Wasserdruck. Durch Befüllen mit destilliertem Wasser schützt es Ihr Zahnsteinentfernungsgerät vor Kalk.

Art. Nr.


- | | |
|--------|---|
| 176875 | Wasserdruckbehälter für Zahnsteinentfernungsgeräte <ul style="list-style-type: none"> • Aus Kunststoff • Max. 3 bar • Volumen: 5 l |
|--------|---|

**Abtropfwanne mit Gitterrost**

- Sammelt das Wasser bei der Zahnsteinentfernung
- Saubere und bequeme Lagerung des Kopfes auf dem Rost
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Art. Nr.

- | | |
|--------|--|
| 177200 | Abtropfwanne mit Gitterrost <ul style="list-style-type: none"> • Maße (in mm): L 390 x B 350 x H 45 |
|--------|--|

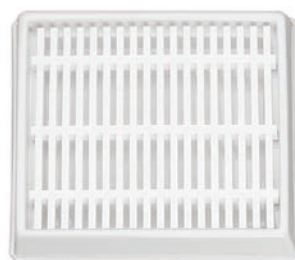



Druckluftspray

- Zum Ausblasen von Handstücken und Turbinen
- Ohne FCKW
- Inklusive Sprühkopf

Art. Nr.	Inhalt
174880	Druckluftspray 400 ml



174010



17401150



17401155

Pflegespray für rotierende Instrumente

- Zur Pflege von Hand- und Winkelstücken
- Ohne Schraubadapter

Art. Nr.	Inhalt
174010	Universal-Pflegespray für rotierende Instrumente 500 ml
17401150	Schraubadapter • Für Hand- und Winkelstücke
17401155	Sprühdüse E-Type • Für Low Speed Handstücke



EICKEMEYER® Polierpaste

- Zum Polieren der Zähne nach der Zahnsteinentfernung
- Mittlere Körnung
- Geschmack: Pfefferminze

Art. Nr.	Inhalt
176782	EICKEMEYER® Polierpaste 200 g



Reinigungsbürstchen für Dental-Bohrer und -Fräser

Zur Reinigung von Dental-Bohrern, Dental-Fräsern etc.

Art. Nr.	Inhalt
174908	Reinigungsbürstchen für Dental-Bohrer und -Fräser

Bohrerset nach SCHUMACHER

Art. Nr.		Anzahl	Form
174106	Set komplett, bestehend aus:		
17410601	Rosenbohrer ISO23 • Für gerades Handstück	2	rund
17410609	Rosenbohrer ISO23 • Für Turbine	5	rund
17410603	Zahnbohrer 23R010 • Für Turbine • Für Katzen	5	spitz zulaufend, abgerundet
17410604	Zahnbohrer 23R012 • Für Turbine • Für Hunde	5	spitz zulaufend, abgerundet
17410605	Zahnbohrer 23R016 • Für Turbine • Für mittlere und große Hunde	5	spitz zulaufend, abgerundet



17410601



17410609



17410603



17410604



17410605

Rosenbohrer für Turbine

- Wolframkarbid-Konstruktion sorgt für lange Lebensdauer
- Packung mit 5 Stück

Art. Nr.	
17410608	Rosenbohrer für Turbine ISO14 • Empfohlene Arbeitsdrehzahl: 70.000 – 220.000 U/min • Max. Drehzahl bis 450.000 U/min
17410610	Rosenbohrer für Turbine ISO18 • Empfohlene Arbeitsdrehzahl: 55.000 – 160.000 U/min • Max. Drehzahl bis 450.000 U/min
17410609	Rosenbohrer für Turbine ISO23 • Empfohlene Arbeitsdrehzahl: 40.000 – 120.000 U/min • Max. Drehzahl bis 300.000 U/min



17410608

**Zahnbohrer für Turbine**

- Wolframkarbid Konstruktion sorgt für lange Lebensdauer
- Spitz zulaufend, abgerundet
- Packung mit 5 Stück

Art. Nr.	
17410603	Zahnbohrer 23R010 • Für Turbine • Für Katzen
17410604	Zahnbohrer 23R012 • Für Turbine • Für Hunde
17410605	Zahnbohrer 23R016 • Für Turbine • Für mittlere und große Hunde



17410603

**Hartmetallfinierer für Turbine**

Hohe Standzeit durch spezielle Hartmetalllegierung, extrem leistungsfähig, ruhiger Lauf.

Art. Nr.	
174209	Hartmetallfinierer für Turbine • Für Turbine • Packung mit 2 Stück • Länge: 6 mm





174105



176787

Bohrerset und Polierkelche für Winkelstücke

Art. Nr.

- 174105 Bohrerset für Winkelstück
- 11-teiliges Basis-Set für Hunde, Katzen und Kleintiere

Passend für:

- Low Speed Winkelstück mit Druckknopf-Haltesystem (174026)
- Low Speed Winkelstück mit 1:1 innenliegender Wasserkühlung (17402205)

- 176787 Polierkelche mit Winkelstückansatz
- Packung mit 5 Stück



Hartmetallbohrersatz für gerades Handstück

Bestehend aus:

- Rosenbohrer Größe 18
- Kegelbohrer Größe 14 + 23
- Kon. Bohrer Größe 12 + 21

Art. Nr.

- 174205 Hartmetallbohrersatz mit Handstückansatz
- Für gerades Handstück

Rosenbohrer für gerades Handstück

Art. Nr.

- 17410601 Rosenbohrer ISO23
- Rund
 - Für gerades Handstück
 - Packung mit 2 Stück



Dental-Bohrersatz für Nager für gerades Handstück

Der extra lange Schaft ermöglicht es auch die hintersten Backenzähne zu erreichen.

Art. Nr.		Länge mm
177280	Dental-Bohrersatz für Nager • Für gerades Handstück • Kann mit Schleimhautschutz (177282) verwendet werden • Packung mit 5 Stück	65

**Bohrerset für gerades Handstück**

Art. Nr.		Länge mm
174103	Bohrerset für Handstück • Für gerades Handstück • Extra lang	44,5

**Dental-Diamantwalze für Nager für gerades Handstück**

Die Diamantwalze ist wesentlich länger beschichtet als bei vergleichbaren Produkten, was die Haltbarkeit deutlich erhöht.

- Hochwertige Qualität, Made in Germany

Art. Nr.	
174107	Dental-Diamantwalze für Nager • Für gerades Handstück • Kann mit Schleimhautschutz (177282) verwendet werden

**Schleimhautschutz für gerades Handstück**

- Schützt den Patienten vor Verletzungen mit dem Bohrer
- Hochwertige Qualität, Made in Germany

Art. Nr.	
177282	Schleimhautschutz • Nur für gerades Handstück • Zur Verwendung mit Nager Dental-Bohrersatz (177280) und Dental-Diamantwalze für Nager (174107)





17734007



Hartmetallfräser für Nager für gerades Handstück

Art. Nr.		Länge mm
17734006	Hartmetallfräser - Für gerades Handstück - Fein, roter Ring	45
17734007	Hartmetallfräser - Für gerades Handstück - Mittel, blauer Ring	50
17734008	Hartmetallfräser - Für gerades Handstück - Grob, grüner Ring	50

Dental-Diamanttrennscheibe SUPERFLEX

Zur Separierung mehrwurzeliger Zähne, Kürzen von Nagezähnen, Fensterung von Schildkrötenpanzern u. v. m.
Bitte beim Einsatz rotierender Instrumente immer Gesichtsschutz tragen.

- Flexibel
- Hochwertige Qualität, Made in Germany

Art. Nr.		Ø mm	Länge mm
174455	Dental-Diamanttrennscheibe SUPERFLEX - Für Handstück - Speziell für Nager - Stärke 0,18 mm	13,0	45
174450	Dental-Diamanttrennscheibe SUPERFLEX Für Handstück	21,0	45
174451	Dental-Diamanttrennscheibe SUPERFLEX Für Winkelstück	21,0	



174455



Schutzschild für Dental-Diamanttrennscheiben für gerades Handstück

Schutz der Schleimhäute vor ungewollten Blutungen.

Art. Nr.	
177284	Schutzschild für Dental-Diamant- trennscheiben - Zum Aufstecken auf ein gerades Handstück - Lieferung ohne Handstück



Einmal-Gewebeschutzspatel

Art. Nr.		Länge mm
177340005	Einmal-Gewebeschutzspatel - Um 90° abgewinkelt - Packung mit 10 Stück	100



Hasenmaulsperrer

- Ideale Arbeitshilfe zur Inspektion der Maulhöhle und zum Abkneifen der Backenzähne
- Für sicheres und einfaches Arbeiten im Maul

Art. Nr.		Länge mm
177303	Hasenmaulsperrer nach SCHMIDTKE • Leichtes Modell • Für Chinchillas	115
177304	Hasenmaulsperrer • Starkes Modell • Für mittelschwere bis schwere Kaninchen	110



177303



177304

Hasenmaulspreizer nach BIKRLE


- Sollte in keiner Tierarztpraxis fehlen
- Der Maulspreizer ermöglicht einen guten Einblick in die Maulhöhle bei leichter Handhabung
- Mit einer Hand leicht zu bedienen
- Schnell zu öffnen und zu schließen

Art. Nr.		Länge mm
177330	Hasenmaulspreizer nach BIKRLE • Starkes Modell • Mit Sperre, selbstspannend • Für Zwergkaninchen und Meerschweinchen	110

**Zahnsanierungs- und Fixationsstand für Nager**

Das narkotisierte Heimtier kann optimal fixiert werden, um sich einen bestmöglichen Zugang zur Maulhöhle zu verschaffen. Die Arbeitstischhöhe und -neigung ist individuell einstellbar, um die optimale Arbeitsposition zu erreichen. Der Maulöffner ist stufenlos auf den Patienten anpassbar.

Art. Nr.	
177324	Zahnsanierungs- und Fixationsstand für Nager • Länge Arbeitstisch: 28 cm • Breite zwischen den Streben: 13,5 cm • Höhe: 29 cm

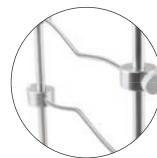



177302

177305

177306



177310

177311

177320



177307



177308



177314



177312

Wangenspreizer für Nager

Art. Nr.		Länge mm
177302	Wangenspreizer • Mit gekehlten Backen • Backenlänge: 16 mm • Backenbreite: 13 mm	62
177305	Wangenspreizer • Für mittelschwere bis schwere Kaninchen • Backenlänge: 21 mm • Backenbreite: 15 mm	85
177306	Wangenspreizer • Für Zwergkaninchen • Backenlänge: 14 mm • Backenbreite: 11 mm	58
177310	Wangenspreizer • Mit langen Backen • Backenlänge: 35 mm • Backenbreite: 10 mm	58
177311	Wangenspreizer • Für Meerschweinchen und Chinchillas • Backenlänge: 21 mm • Backenbreite vorne: 4 mm • Backenbreite hinten: 9 mm	60
177320	Wangenspreizer (extra klein) • Für kleine Heimtiere • Backenlänge: 11 mm • Backenbreite: 9 mm	35

Zungenspatel für Nager

Art. Nr.		Länge mm
177307	Zungenspatel • Gerade • Flach	175
177308	HOLLMANN Zungenspatel • Optimale Fixierung der Zunge durch gekahlte Form • Klein	170
177309	HOLLMANN Zungenspatel • Optimale Fixierung der Zunge durch gekahlte Form • Groß	190
174825	HEIDEMANN Zungenspatel • Zur Zahnextraktion bei Nagern	170

MINI-FRIEDMANN Hohlmeißelzangen

Art. Nr.		Länge mm
177314	MINI-FRIEDMANN Hohlmeißelzange • Für extra schlankes Maul	140
177312	MINI-FRIEDMANN Hohlmeißelzange • Sehr schlank	120

Zahnschneidezange und Zahnraspel für Nager

Art. Nr.		Länge mm
177316	Zahnschneidezange für Nager, mit Hartmetalleinlage (TC)	170
	Leichte Handhabung: Mit wenig körperlichem Druck werden Haken sicher entfernt und können mit der Raspel geglättet werden. • Doppelfeder • Hohe Stabilität • Einfache Entfernung von Haken und Spitzen der Molaren	
177318	Zahnraspel	180
	• Fein	
177319	Zahnraspel	180
	• Fein	
	• Diamantiert	



177316



177319

Zahnschneidezangen für Nager

Für eine optimale Entfernung von Haken und Spitzen. Mit Feder, Schneidespitze leicht nach unten gebogen, für eine freie Sicht in die Mundhöhle.

Art. Nr.		Länge mm
177315	Zahnschneidezange	180
	• Für Kaninchen und Meerschweinchen	
177317	Zahnschneidezange	120
	• Für Chinchillas	



177315

Luxatoren für Nager

Art. Nr.		Länge mm
177322	Schneidezahnluxator (untere Incisivi)	195
	• Für Heimtiere	
	• Zur Lockerung und Extraktion der Incisivi	
177323	Schneidezahnluxator (obere Incisivi)	190
	• Für Heimtiere	
	• Zur Lockerung und Extraktion der Incisivi	
17734003	Schneidezahnluxator	190
	• Für Kaninchen	
17734004	Backenzahnluxator	170
	• Für Kaninchen	



177322



17734004




17734003

17734004

17734012

17734001

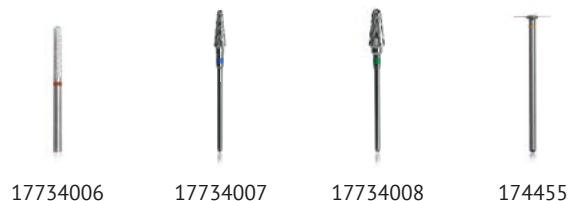

17734006

17734007

17734008

174455



177311

177310

177305

177306



177319

171411

177340005

Zahnextraktionszange für Kaninchen

Backen sind um 100° gebogen und erleichtern so die Extraktion von Molaren und Prämolaren.

Art. Nr.		Länge mm
17734001	Zahnextraktionszange für Kaninchen	160

Zahnbehandlungsset für Kaninchen

Starterset zur Diagnose und Behandlung von Zahnerkrankungen bei Kaninchen nach SCHUMACHER.

Art. Nr.		Länge mm
177340	Set komplett, bestehend aus:	
17734003	Schneidezahnluxator	190
17734004	Backenzahnluxator	170
17734012	Parodontalsonde Fig. CP10	155
17734001	Zahnextraktionszange	160
17734006	Hartmetallfräser • Fein, roter Ring	45
17734007	Hartmetallfräser • Mittel, blauer Ring	50
17734008	Hartmetallfräser • Grob, grüner Ring	50
174455	Dental-Diamanttrennscheibe SUPERFLEX für Handstück • Speziell für Nager • Stärke 0,18 mm • Flexibel • Hochwertige Qualität, Made in Germany • Ø 13 mm	45
177311	Wangenspreizer • Für Meerschweinchen und Chinchillas • Backenlänge: 21 mm • Backenbreite vorne: 4 mm • Backenbreite hinten: 9 mm	60
177310	Wangenspreizer • Für Zwergkaninchen • Backenlänge: 14 mm • Backenbreite: 11 mm	58
177305	Wangenspreizer • Mit langen Backen • Backenlänge: 35 mm • Backenbreite: 10 mm	85
177306	Wangenspreizer • Für mittelschwere bis schwere Kaninchen • Backenlänge: 21 mm • Backenbreite: 15 mm	58
177319	Zahnraspel • Fein, diamantiert	180
171411	Fixierpinzette nach GRÄFE • Mit Stift	110
177340005	Einmal-Gewebeschutzspatel • Um 90° abgewinkelt • Packung mit 10 Stück	100

Nager Dental-Set mit rotierenden Instrumenten

Das Nager Dental-Set mit rotierenden Instrumenten hilft bei der sicheren Kürzung von Nagerzähnen.

Art. Nr.		Länge mm
177341	Set komplett, bestehend aus:	
177305	Wangenspreizer - Für (mittel-)schwere Kaninchen - Backenlänge: 21 mm - Backenbreite: 15 mm	85
177306	Wangenspreizer - Für Zwergkaninchen - Backenlänge: 14 mm - Backenbreite: 11 mm	58
177310	Wangenspreizer - Mit langen Backen - Backenlänge: 35 mm - Backenbreite: 10 mm	58
17734001	Zahnextraktionszange	160
17734003	Schneidezahnluxator	190
17734004	Backenzahnluxator	170
177304	Hasenmaulsperner - Starkes Modell - Für (mittel-)schwere Kaninchen	110
17734012	Parodontalsonde Fig. CP10	155
17734007	Hartmetallfräser - Für gerades Handstück - Mittel, blauer Ring	50
17734008	Hartmetallfräser - Für gerades Handstück - Grob, grüner Ring	50
177280	Dental-Bohrersatz für Nager - Für gerades Handstück - Extra langer Schaft - Packung mit 5 Stück	65
177282	Schleimhautschutz - Nur für gerades Handstück - Schützt den Patienten vor Verletzungen mit dem Bohrer	
174450	Dental-Diamanttrennscheibe SUPERFLEX für Handstück - Flexibel - Ø 21 mm	45
177284	Schutzschild für Dental-Diamanttrennscheiben Zum Aufstecken auf ein gerades Handstück	
177307	Zungenspatel - Gerade - Flach	175
177308	HOLLMANN Zungenspatel - Optimale Fixierung der Zunge durch gekahlte Form - Klein	170
177309	HOLLMANN Zungenspatel - Optimale Fixierung der Zunge durch gekahlte Form - Groß	190
177319	Zahnraspel Fein, diamantiert	180
517050	Instrumentenbehälter - Aus Aluminium - Mit gelochtem Boden und Deckel - Mit seitlichen Verschlüssen - Maße (in cm): L 30 x B 14 x H 7	



177305



177306



177310



17734001



17734003



17734004



177304



17734012



17734007



17734008



177280



177282



174450



177284



177307



177308



177309



177319



517050



175000GO



175004

175000

DENTANOMIC Dentalinstrumente – Sets

Das komplette Set an Luxatoren und Elevatoren für die moderne Tierarztpraxis.

DENTANOMIC Dentalinstrumente sind eine Innovation auf dem Gebiet der Dentalchirurgie und vereinfachen die Zahnextraktion wesentlich. Mit den auswechselbaren Klingen lassen sich die Instrumente schnell und einfach an die jeweilige OP-Situation anpassen. Außerdem muss nach Verschleiß der Klinge nicht mehr das gesamte Instrument entsorgt werden. Die Klingen sind extra gehärtet und verfügen über einen speziellen, sehr scharfen Anschliff, um die zervikalen Parodontalfasern ohne großen Kraftaufwand zu durchtrennen und den Parodontalspalt aufzuweiten. Der sehr leichte, ergonomisch geformte Handgriff aus hochwertigem Aluminium liegt optimal in der Hand und ermöglicht so eine sichere Instrumentenführung.

Art. Nr.

175000BR	DENTANOMIC Set – Bronze Set komplett, bestehend aus:
	• 2 Handgriffen nach Wahl • Elevator-Klingen Set (alle Größen) • Luxator-Klingen Set (alle Größen) • Aufbewahrungsrack
175000SI	DENTANOMIC Set – Silber Set komplett, bestehend aus:
	• 3 Handgriffen nach Wahl • Elevator-Klingen Set (alle Größen) • Luxator-Klingen Set (alle Größen) • Aufbewahrungsrack • Schleifset
175000GO	DENTANOMIC Set – Gold Set komplett, bestehend aus:
	• 5 Handgriffen nach Wahl • Elevator-Klingen Set (alle Größen) • Luxator-Klingen Set (alle Größen) • Aufbewahrungsrack • Schleifset • Sterilisationsbehälter

DENTANOMIC Handgriffe

Art. Nr.		Länge mm
175000	DENTANOMIC Handgriff • Blau	65
175001	DENTANOMIC Handgriff • Grün	65
175002	DENTANOMIC Handgriff • Pink	65
175008	DENTANOMIC Handgriff • Orange	65
175009	DENTANOMIC Handgriff • Lila	65
175005	DENTANOMIC Handgriff • Längerer Schaft • Blau	80
175006	DENTANOMIC Handgriff • Längerer Schaft • Grün	80
175007	DENTANOMIC Handgriff • Längerer Schaft • Pink	80
175003	DENTANOMIC Handgriff • Längerer Schaft • Orange	80
175004	DENTANOMIC Handgriff • Längerer Schaft • Lila	80

DENTANOMIC Klingen

Art. Nr.		Breite mm
175100	DENTANOMIC Elevator-Klinge	2
175101	DENTANOMIC Elevator-Klinge	3
175102	DENTANOMIC Elevator-Klinge	4
175103	DENTANOMIC Elevator-Klinge	5
175104	DENTANOMIC Luxator-Klinge	1,5
175105	DENTANOMIC Luxator-Klinge	2
175106	DENTANOMIC Luxator-Klinge	3
175107	DENTANOMIC Luxator-Klinge	4
175108	DENTANOMIC Luxator-Klinge	5
175109	DENTANOMIC Luxator-Klinge • Speziell für Pferde	4
175110	DENTANOMIC Luxator-Klinge • Speziell für Pferde	5



175102



175106

DENTANOMIC Zubehör

Art. Nr.		Breite mm
175200	Aufbewahrungs- und Sterilisationsrack • Für 9 DENTANOMIC Klingen • Mit Deckel • Maße (in cm): L 19 x B 8 x H 2	
175201	DENTANOMIC Klingen-Schleifset	
175202	DENTANOMIC Sterilisationsbehälter • Mit herausnehmbarem Tablett • Für bis zu 5 Handgriffe	
E17500001	Ersatzschlüssel für DENTANOMIC Handgriffe	



175200



175202



175323



175803

Elevatoren

Speziell für die Zahnextraktion bei Katzen und kleinen Hunden wurde diese extrem schmalen Elevatoren entwickelt. Darüber hinaus sind die Elevatoren ein gutes Hilfsmittel zum Heben von frakturierten Zahnwurzeln. Aufgrund der fragilen Bauform ist ein allzu großer Kraftaufwand zu vermeiden. Das Nachschärfen der Spitze ist mittels Schleifstein möglich.

Art. Nr.		Breite mm	Länge mm
175322	Elevator • Mit gerader Spitze	1	135
175323	Elevator • Mit gerader Spitze	2	135
175803	Kleiner Elevator für Katzen	2	170



176414



175324

Periosteheber / Periostaler Elevator

Art. Nr.		Länge mm
176414	Periostaler Elevator, Standardgriff • Liegt optimal in der Hand, bessere Instrumentenführung als bei doppelendigen Elevatoren • Konzipiert für die Extraktion der Canini • Leichte Durchtrennung der zervikalen Parodontalfasern	150
175324	Periosteheber, doppelendig • Die scharfe, spitze und schmale Seite wird für das Abheben gingivaler Flaps bei Katzen und kleinen Hunden verwendet • Das andere Ende ist abgerundet und minimiert das Verletzungsrisiko durch Abrutschen • Beide Enden sind leicht gebogen	190
176415	Periostaler Elevator, doppelendig • Die feinen, runden Arbeitsenden sind tellerförmig mit einem Durchmesser von 4 mm und 6 mm gefertigt und haben eine schneidende und schälende Funktion zur Durchtrennung der Parodontalfasern	205



175312



175313

Winged Elevatoren

Die Wurzelhaut lässt sich einfach durch eine drehende Bewegung in der Tiefe zerschneiden und der Zahn löst sich leicht.

Art. Nr.		Breite mm	Länge mm
175312	Winged Elevator	2	145
175313	Winged Elevator	3	145
175314	Winged Elevator	4	145
175315	Winged Elevator	5	145
175316	Winged Elevator	6	145


Luxatoren

Die EICKEMEYER® Luxatoren eignen sich in hervorragender Weise zum Durchtrennen zervikaler Parodontalfasern und dem Aufweiten des Parodontalspalts. Sie werden parallel zur Längsachse des zu entfernenden Zahnes oszillierend zwischen Knochen und Zahnwurzel eingeführt (ohne Kraftaufwand). Die Folge ist die Aufweitung der Alveole, damit der Zahn leicht extrahiert werden kann. Aufgrund der schlanken Bauform ist ein Heben unbedingt zu vermeiden, da ansonsten das Instrument beschädigt wird. Die breite und kurze Griffform (Stubby Handle) ermöglicht ein bequemes Arbeiten.

Art. Nr.		Breite mm	Länge mm
175317	Luxator	1	125
175318	Luxator	2	125
175319	Luxator	3	125
175320	Luxator	4	125
175321	Luxator	5	125



175319

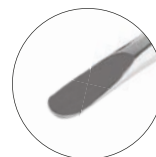

Luxator nach SCHUMACHER

Luxator zur Wurzelrest-Entfernung bei der Katze, modifiziert nach SCHUMACHER.

Art. Nr.	
175309	Luxator nach SCHUMACHER



Luxator Racifein

Art. Nr.		Länge mm
175405	Luxator Racifein	145
	• Modifiziert	
	• Gerade	





175302



BEIN Wurzelheber

Ideal für schonende Zahnextraktion. Handlich geformt für den richtigen Kraftaufwand, für jede Behandlung die passende Form.

Art. Nr.		Breite mm	Länge mm
175302	BEIN Wurzelheber	2	135
175303	BEIN Wurzelheber	3	135
175304	BEIN Wurzelheber	4	135
17530801	BEIN Wurzelheber	5	135




175308



Zahnextraktoren nach SCHUMACHER

Die Wurzelhaut lässt sich einfach durch eine drehende Bewegung in der Tiefe zerschneiden und der Zahn löst sich leicht.

Art. Nr.		Breite mm	Länge mm
175305	Zahnextraktor nach SCHUMACHER • Größe 1	2	135
175306	Zahnextraktor nach SCHUMACHER • Größe 2	3	135
175307	Zahnextraktor nach SCHUMACHER • Größe 3	4	135
175308	Zahnextraktor nach SCHUMACHER • Größe 4	5	135

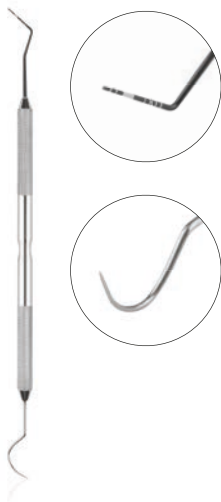

17734011



17647202



Parodontalsonden

Die Wurzelhaut lässt sich einfach durch eine drehende Bewegung in der Tiefe zerschneiden und der Zahn löst sich leicht.

Art. Nr.		Länge mm
17734011	Parodontalsonde • Doppelendig	170
17734012	Parodontalsonde • Fig. CP10	155
17647202	Parodontometer	160
176456	Dental-Messsonde • Zum Ausmessen der Tiefe von Zahnfleischtaschen	160
176459	Zahnsonde • Fig. 9 • Bei Karies, Zahnstein, tiefen Taschen	155
176467	Zahnsonde • Fig. 17 • Bei Zahnstein und Taschen • Ideal für Katzen	170

Zahninstrumente für Kleintiere

Art. Nr.		Länge mm
176410	JAQUETTE Zahnreiniger • Doppelt • Rechtwinklig abgebogen	165
176412	Zahnreiniger • Doppelt • Rechtwinklig abgebogen	165
176422	Mundspiegel mit Griff • Ø Spiegel: 22 mm	165



176410



176412



176422

Dental-Küretten/Raspatorien

Art. Nr.		Länge mm
17647203	Dental-Kürette • GRA 3/4"	170
17647204	Dental-Kürette • GRA 9/10"	170
17647206	Raspatorium • Doppelseitig • Für Katzen	170
17647207	Raspatorium • Doppelseitig • Für Hunde	175
166014	WILLIGER Raspatorium • Für mittlere/große Hunde • Abgerundetes Funktionsteil • Scharf geschliffen • Breiter, gerillter Handgriff für die sichere Führung des Raspatoriums • Abgewinkelt • Breite: 5 mm	130
166016	WILLIGER Raspatorium • Für große Hunde • Abgerundetes Funktionsteil • Scharf geschliffen • Breiter, gerillter Handgriff für die sichere Führung des Raspatoriums • Abgewinkelt • Breite: 6 mm	160



17647203



17647206

**Periostscheiber**

Art. Nr.		Länge mm
176413	Periostscheiber • Fein • Doppelendig	180





175801



176010

Zahnextraktoren nach FAHRENKRUG

Art. Nr.		Breite mm	Länge mm
175801	Zahnextraktor nach FAHRENKRUG • Größe 1 • Für Hunde	2	200
175802	Zahnextraktor nach FAHRENKRUG • Größe 2 • Für Katzen und kleinere Hunde	3	190

Minnesota Retractor

Dieser speziell für die Tiermedizin entwickelte Retraktor ist ein Multitalent. Er schützt die Schleimhäute beim Arbeiten mit der Turbine, hält Zunge und Lippen fern und ist universell einsetzbar.

Art. Nr.		Länge mm
176022	Minnesota Retractor	155

Arkansas Schleifstein

- Geeignet für das Schleifen von Drehmeißeln
- Öl verwenden, um zu verhindern, dass Stahlpartikel die Poren des Steines verstopfen
- Abgeschrägte Form (Höhe 2,7 mm bzw. 6,3 mm)

Art. Nr.		Breite cm	Länge cm
176480	Arkansas Schleifstein	5,1	5,1

Zahnzangen für Katzen und Hunde

- An die Form der Zähne bei Tieren angepasst
- Parallel verlaufende Backen in geöffnetem Zustand, dadurch besserer Griff

Art. Nr.		Länge mm	Form
176010	Zahnzange • Für Katzen und kleine Hunde • Maul diamantiert für optimalen Halt am Zahn	110	gerade
176011	Zahnzange • Für Katzen und kleine Hunde • Neues Modell	110	gerade
176016	Zahnzange • Für Hunde • Neues Modell	165	gerade
176015	Zahnzange • Für Hunde • Maul diamantiert für optimalen Halt am Zahn	165	gerade
176017	Zahnzange • Für Hunde	165	gerade

Zahnzange nach WITZEL

Art. Nr.		Länge mm
176215	Zahnzange nach WITZEL • Fig. 166	150

**Wurzelsplitterzange nach STIEGLITZ**

Art. Nr.		Länge mm
176020	Wurzelsplitterzange nach STIEGLITZ	130

**Wurzelsplitterzange**

Art. Nr.		Länge mm
176024	Wurzelsplitterzange	150





Zahnwurzel-Extraktionszange

Bequemes Entfernen von Zahnwurzelspitzen. Die schlanken, leicht gebogenen Enden mit Randzahnung erlauben eine leichte Extraktion. Durch die Feder öffnet die Zange automatisch und ist durch ihre geschwungene Form ergonomisch optimiert.

Art. Nr.		Länge mm
176023	Zahnwurzel-Extraktionszange	150



Rechtwinklige Extraktionszange

Die abgewinkelten Ecken erlauben einen optimalen Zugang und die Backen haben im geschlossenen Zustand keinen Kontakt. Dadurch wird das Risiko einer Frakturierung minimiert.

- Speziell für die Extraktion von Milchzähnen bei Katzen und kleinen Hunden
- Durch Feder selbsttätiges Öffnen

Art. Nr.		Länge mm
176025	Rechtwinklige Extraktionszange	125



LaGrange Zahnfleisch-Schere


S-förmig – für ergonomische Schnittführung

Art. Nr.		Länge mm
115100	LaGrange Zahnfleisch-Schere	115

Zahnreiniger für Kleintiere

- Zum Abtragen von Zahnstein
- Stabile Form

Art. Nr.		Länge mm
176401	Zahnreiniger • Hakenförmig	150
176402	Zahnreiniger • Mit Schmelzmeißel	150
176403	Zahnreiniger • Flügelform links	155
176404	Zahnreiniger • Flügelform rechts	145
176405	Zahnreiniger • Habichtsschnabel • Spitz	150
176406	Zahnreiniger • Habichtsschnabel • Spitz • Stark	150

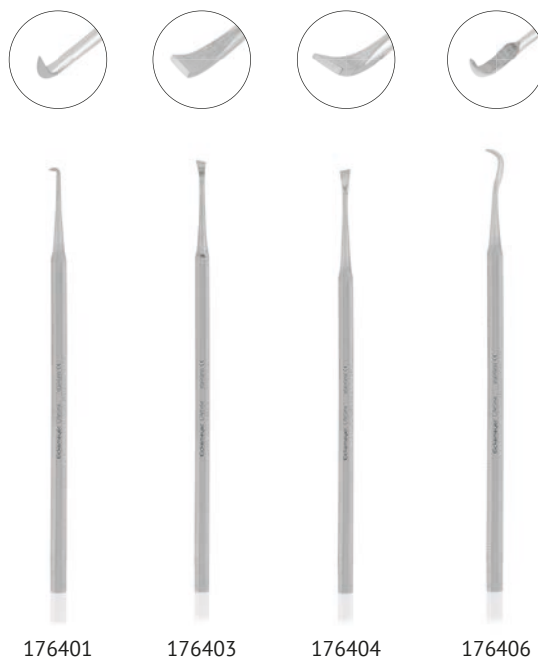

176401

176403

176404

176406

Zahnbehandlungsset für Katzen, klein

Starterset zur Behandlung von Zahnerkrankungen bei Katzen nach MIHALJEVIĆ.

Art. Nr.		Länge mm	Form
176471	Set komplett, bestehend aus:		
134009	FEILCHENFELD Splitterpinzette	90	
110609	Feine Schere • Sp/sp	90	gerade
176413	Periostschieber • Doppelendig	180	fein
175405	Luxator Racifein • Modifiziert	145	gerade
175312	Winged Elevator • Breite: 2 mm	145	
175302	BEIN Wurzelheber • Breite: 2 mm	135	



134009

110609



176413

175405

175312

175302



134009



110609



124009



176020



176011



176215



175405



175302



175312



17734011



175803



176413

Zahnbehandlungsset für Katzen, groß

Großes Set zur Diagnose und Behandlung von Zahnerkrankungen bei der Katze nach MIHALJEVIĆ.

Art. Nr.		Länge mm	Form
176470	Set komplett, bestehend aus:		
134009	FEILCHENFELD Splitterpinzette	90	
110609	Feine Schere • Sp/sp	90	gerade
124009	SPENCER Ligaturschere	90	
176020	Wurzelsplitterzange nach STIEGLITZ	130	
176011	Zahnzange • Für Katzen und kleine Hunde • Neues Modell	110	gerade
176215	WITZEL Zahnzange • Fig. 166	150	
175405	Luxator Racifein • Modifiziert	145	gerade
175302	BEIN Wurzelheber • Breite: 2 mm	135	
175312	Winged Elevator • Breite: 2 mm	145	
17734011	Parodontalsonde • Doppelendig	170	
175803	Kleiner Elevator für Katzen • Breite: 2 mm	170	
176413	Periostschieber • Doppelendig	180	fein

Zahnbehandlungsset für Hunde und Katzen

Zur Diagnostik des Zahnhalteapparates, der Zähne und zur Parodontalchirurgie bei Hund und Katze nach SCHUMACHER.

Art. Nr.		Länge mm	Form
176472	Set komplett, bestehend aus:		
17647206	Raspatorium • Doppelseitig • Für Katzen	170	
17647207	Raspatorium • Doppelseitig • Für Hunde	175	
17647204	Dental-Kürette • GRA 9/10"	170	
17647203	Dental-Kürette • GRA 3/4"	170	
17647202	Parodontometer	160	
17734011	Parodontalsonde • Doppelendig	170	
132912	ADSON-BROWN Chirurgische Pinzette • 9 x 9 Zähne	120	
972016	ECONOMY Anatomische Pinzette	160	
170710	Irispinzette nach GRÄFE	100	gebogen
152414	MATHIEU-OLSEN Nadelhalter mit Hart- metalleinlage (TC) • Mit Schere	140	
17647205	MAYO Schere • St/st	145	gerade
100503	STANDARD Skalpellgriff • Nr. 3 • Klein • Für Klingen Fig. 10 – 15	125	
98100711	EICKEMEYER® Skalpell- klinge Fig. 11		



17647206



17647207



17647204



17647203



17647202



17734011



132912



972016



170710



152414



17647205



100503



98100711



175405



175312



175305



175306



175307



175801



175802



17734011



17647203



17647204



176020



176011



20012005



20012004



20012003



20012002



20012001



517050

Zahnbehandlungsset für Hunde und Katzen, groß

- Unser Dental-Set enthält alle notwendigen Instrumente, um die am häufigsten auftretenden Zahnerkrankungen zu behandeln.
- All diese Instrumente sind auch separat erhältlich.

Art. Nr.		Länge mm	Form
177371	Set komplett, bestehend aus:		
175405	Luxator Racifin • Modifiziert	145	gerade
175312	Winged Elevator • Breite: 2 mm	145	
175305	Zahnextraktor nach SCHUMACHER • Größe 1 • Breite: 2 mm	135	gerade
175306	Zahnextraktor nach SCHUMACHER • Größe 2 • Breite: 3 mm	135	gerade
175307	Zahnextraktor nach SCHUMACHER • Größe 3 • Breite: 4 mm	135	gerade
175801	Zahnextraktor nach FAHRENKRUG • Größe 1 • Für Hunde • Breite: 2 mm	200	
175802	Zahnextraktor nach FAHRENKRUG • Größe 2 • Für Katzen & kleinere Hunde • Breite: 3 mm	190	
17734011	Parodontalsonde • Doppelendig	170	
17647203	Dental-Kürette GRA 3/4"	170	
17647204	Dental-Kürette GRA 9/10"	170	
176020	Wurzelsplitterzange nach STIEGLITZ	130	
176011	Zahnzange • Für Katzen & kleine Hunde • Neues Modell	110	gerade
20012005	EICKEMEYER® Maulsperrer • Größe XS • 3 – 4 cm		
20012004	EICKEMEYER® Maulsperrer • Größe S • 4 – 6 cm		
20012003	EICKEMEYER® Maulsperrer • Größe M • 6 – 8 cm		
20012002	EICKEMEYER® Maulsperrer • Größe L • 9 – 11,5 cm		
20012001	EICKEMEYER® Maulsperrer • Größe XL • 12 – 15 cm		
517050	Instrumentenbehälter • Aus Aluminium • Mit gelochtem Boden/Deckel • Mit seitlichen Verschlüssen • Nicht autoklavierbar • Maße (in cm): L 30 x B 14 x H 7		

EICKEMEYER® Maulsperrer-Set

Gewinner des Cat Friendly Award!


Mit den EICKEMEYER® Maulsperrern können Zahnbehandlungen und Zahnkorrekturen bei Katzen und Hunden jetzt noch sicherer durchgeführt werden!

Diese neuartigen Maulsperrer bestehen aus zwei Zylindern, die über Gewinde in der Länge verstellbar sind und so optimal an jedes Tiermaul angepasst werden können. Durch den definierten Verstellbereich ist kein Überspannen mehr möglich und Verletzungen oder gar irreparable Schädigungen sind bei korrekter Anwendung ausgeschlossen.

- Material: Hartplastik
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Röntgendurchlässig

Art. Nr.

200120	Set komplett, bestehend aus:
20012005	EICKEMEYER® Maulsperrer • Größe XS • In der Länge verstellbar von 3 bis 4 cm
20012004	EICKEMEYER® Maulsperrer • Größe S • In der Länge verstellbar von 4 bis 6 cm
20012003	EICKEMEYER® Maulsperrer • Größe M • In der Länge verstellbar von 6 bis 8 cm
20012002	EICKEMEYER® Maulsperrer • Größe L • In der Länge verstellbar von 9 bis 11,5 cm
20012001	EICKEMEYER® Maulsperrer • Größe XL • In der Länge verstellbar von 12 bis 15 cm

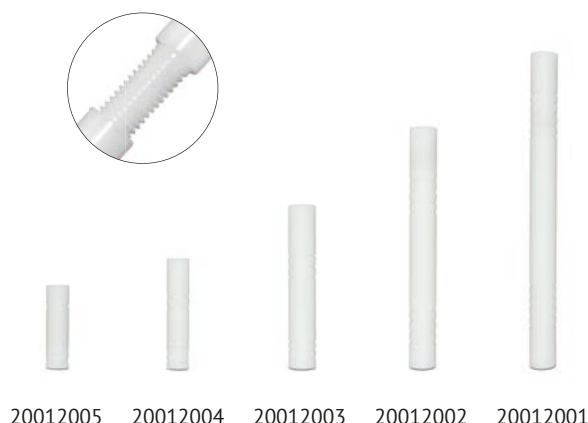**Beißhölzer**

Sicheres und einfaches Offenhalten des Mauls.

- Geringes Gewicht
- Robust
- Preisgünstig
- Vielseitig einsetzbar

Art. Nr.**Länge
mm**

200007	Beißholz • Klein	70
200009	Beißholz • Groß	90



2000007

2000009

Zahnmodelle

- Transparenter, kieferförmiger Acrylblock
- Für eine anschauungsreiche und detailgetreue Befunderhebung

Art. Nr.

174092	Zahnmodell Katze
174093	Zahnmodell Hund
174091	Zahnmodell Nager



174093



174091



605960



605961



178260

DENTO-DORM® Lagerungskissen

- Nach MIHALJEVIĆ
- Für Dentalbehandlung, Röntgen, CT und Chirurgie
- Stabilisiert durch unzählige kleine Luftpolster die Körpertemperatur der Patienten während der Narkose
- Unterstützt die Lagerung des Patienten und ermöglicht dadurch ergonomisches Arbeiten
- Verhindert ein Rutschen des Patienten auch bei Schräglage des Behandlungstisches
- Ist wasserfest und weist eine hygienische, kleinporige, versiegelte Oberfläche auf, die leicht zu reinigen und desinfizieren ist
- Aus Hartschaum, enthält keine chemischen Bestandteile zur Vernetzung, ist robust, formstabil und dabei sehr leicht

Art. Nr.

605960	DENTO-DORM® Lagerungskissen • Inkl. 4 Lagerungskeilen • Maße (in cm): L 75 x B 30 x H 8
605961	DENTO-DORM® Lagerungskissen • Das Set besteht aus 2 Kopflagerungskeilen passend für das DENTO-DORM® Lagerungskissen (605960)

DENTO-DORM® Tracheal-Sponge Kofferset

Der DENTO-DORM® Tracheal-Sponge ist eine wasserabweisende Abdichtungsmembran für die Luftröhre, insbesondere für den Einsatz bei Zahnsteinentfernung und Dentalbehandlung. Er wird bei der Behandlung tief im Rachen positioniert und verhindert so das Eindringen von Zahnsteinbrocken und Wasser in den Rachenraum. Zudem hat der Schwamm mittig eine eng abdichtende Durchlassöffnung für den Trachealtubus, wodurch der Tubus gegen Verrutschen gesichert ist.

- Aus Zellkautschuk
- Autoklavierbar

Art. Nr.

178260	DENTO-DORM® Tracheal-Sponge Kofferset • Inhalt: 48 Tracheal-Sponges in 9 verschiedenen Größen für die kleine Katze bis zum großen Hund (12 grob und 36 fein)
178261	DENTO-DORM® Tracheal-Sponge Nachfüllpack • Inhalt: 12 Sponges • Grob • In 3 verschiedenen Größen
178262	DENTO-DORM® Tracheal-Sponge Nachfüllpack • Inhalt: 36 Sponges • Fein • In 6 verschiedenen Größen

Eickemeyer®

[illegible]

T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | info@eickemeyer.de | www.eickemeyer.de

Eickemeyer®

INHALT

A		K		T	
Abtropfwanne mit Gitterrost	15	Kompressor für Dentaleinheiten	9	Tracheal-Sponges	
		Küretten	31	DENTO-DORM®	40
B				Turbinenhandstücke	9
Beißhölzer	39	L		W	
Bohrer für		Lagerungskissen		Wasserdruckbehälter für	
gerades Handstück	17–19	DENTO-DORM®	40	Zahnsteinentfernungsgeräte	15
Bohrer für Turbine	17	Low Speed Handstücke	10	Wurzelheber	30
Bohrer für Winkelstück	18	Luxatoren für Kleintiere	29	Wurzelsplitterzangen	33–34
		Luxatoren für Nager	23		
D				Z	
Dental Reader	4, 5	M		Zahnbehandlungssets	
Dental-Röntgensensor	3	Maulsperrer/ Wangenspreizer		für Katzen und Hunde	35–38
Dentale Röntgengeräte	2	für Nager	21, 22	Zahnbehandlungssets	
Dentaleinheiten	6, 7	Maulsperrer für Kleintiere	39	für Nager	24, 25
DENTANOMIC		Mobiles Dentalstativ	12	Zahnbohrgeräte	13, 14
Dentalinstrumente	26–27			Zahnextraktoren	30, 32
Desinfektionsmittel		P		Zahnfleisch-Schere	34
für Dentaleinheiten	12	Parodontalsonden	30	Zahninstrumente	
Diamanttrennscheibe		Periostheber/ -schieber	28, 31	für Kleintiere	31
SUPERFLEX	20	Pflegespray für rotierende		Zahnmodelle	39
Diamantwalze für Nager	19	Instrumente	16	Zahnreiniger für Kleintiere	35
Druckluftspray	16	Polieraufsätze	15	Zahnsanierungs- und	
		Polierkelche	15	Fixationsstand für Nager	21
E		Polierpaste	16	Zahnsteinentfernungsgeräte	13
EiVIS – EICKEMEYER® Veterinary		R		Zahnzangen	
Imaging Software	3	Raspatorien	31	für Katzen und Hunde	32–34
Elevatoren	28	Reinigungsbürstchen		Zahnzangen für Nager	22–24
F		für Bohrer und Fräser	16	Zungenspatel für Nager	22
Finierer für Turbine	17	Reinigungsmittel			
Fräser für gerades Handstück	20	für Dentaleinheiten	12		
		Retractor	32		
G					
Gewebeschutzspatel	20	S			
H		Schleifstein	32		
Handstücke	9, 10	Schleimhautschutz	19		
Handstücke – Reinigung		Schutzschild			
und Pflege	11	für Diamanttrennscheiben	20		
		Starterset Dentaleinheiten	8		
		Starterset für			
		Zahnbohrereinheiten	14		

EICKEMEYER KG
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland
T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de
www.eickemeyer.de