




LifeVet® P
Veterinär-Pulsoximeter

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Sichere Patientenüberwachung



321865

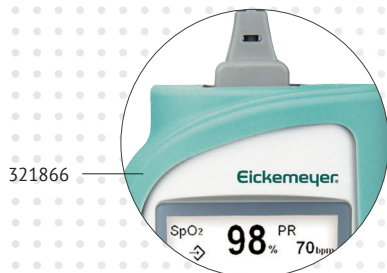

321866

LifeVet® P Veterinär-Pulsoximeter

Mit dem LifeVet® P können die funktionelle Sauerstoffsättigung von arteriellem Hämoglobin (SpO₂) und die Pulsfrequenz bei Hunden, Katzen und Pferden in Echtzeit gemessen und angezeigt werden. Auf der LCD-Anzeige werden wichtige Parameterinformationen leicht ablesbar dargestellt.

- ▶ Sofort einsatzbereit, da keine Kalibrierung notwendig ist
- ▶ Klein und handlich
- ▶ Kurven- oder großformatige Zahlenanzeige der Sauerstoffsättigung (SpO₂ – in %) und Pulsfrequenz (PF in bpm)
- ▶ Lange Betriebsdauer von bis zu 48 Stunden und schnelle Ladezeit erleichtern den fast ununterbrochenen Einsatz
- ▶ Großer Datenspeicher für Messdaten macht Datenmanagement einfach
- ▶ Alarmgrenzen für Pulsfrequenz und Sauerstoffsättigung individuell einstellbar
- ▶ Leicht zu reinigen
- ▶ Anzeige Sauerstoffsättigung: zwischen 1 % und 100 %
- ▶ Anzeige Pulsfrequenz: zwischen 25 und 350 Schlägen pro Minute (bpm)
- ▶ Inkl. zwei Sensorclips (klein und groß), mit denen der Sensor an einer geeigneten Position angebracht wird
- ▶ Inkl. Ladestation und wiederaufladbarem NiMH-Akkupack, optional mit 4 AA-Batterien

321865

Gummi-Schutzhülle für LifeVet® P Pulsoximeter (Art. Nr. 321865)

- ▶ Farbe: grün

321866

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de