

# TONOMETRIE

## Icare® TONOVET Plus

*Schnell, schmerzlos & genau*



## Tonometrie

# SCHNELL, SCHMERZLOS & GENAU

## Icare® TONOVET Plus

---

*Das TONOVET Plus misst auf Basis der patentierten Rebound-Methode, mit der der Augeninnendruck (IOP) genau, schnell und ohne Lokalanästhesie gemessen werden kann. Die Messung wird vom Patienten sehr gut toleriert, da sie in den meisten Fällen kaum bemerkt wird.*



### Voreinstellungen für vier Tierarten

Automatische Messeinstellungen für Hund, Katze, Kaninchen und Pferd.

### Einfachheit

Alle sechs Messungen können mit einem Knopfdruck durchgeführt werden.

### Gute Toleranz durch Patienten

Die sanfte Messung benötigt keine Lokalanästhesie, bei den meisten Tieren wird nicht einmal der Hornhautreflex ausgelöst.

### Klare Benutzeroberfläche

Großes Display und benutzerfreundliche Oberfläche mit klaren Botschaften.

---

*„Das neuartige Positionslicht an der Spitze des TONOVET Plus hilft nicht nur beim horizontalen Ausrichten des Geräts, sondern beleuchtet zudem die Hornhaut, was sogar eine Messung im Dunkeln ermöglicht.“*

---

*viele verbesserte Funktionen*



## TONOMETRIE

### Icare® TONOVET Plus

---

- ▶ Verbesserte Genauigkeit für verschiedene Tierarten
- ▶ Automatischer Messablauf auf Knopfdruck
- ▶ Innovatives Positionslicht
- ▶ Großes Display
- ▶ Digitale Messunterstützung
- ▶ Einfach zu bedienen, steile Lernkurve
- ▶ Kurze Vorbereitungszeit
- ▶ Universal AA-Batterien
- ▶ 2 Jahre Garantie



---

#### Technische Daten

- ▶ Anzeigeneinheit: Millimeter-Quecksilbersäule (mmHg)
- ▶ Messbereich: 10–60 mmHg
- ▶ Genauigkeit:  
± 2,5 mmHg (10–30 mmHg)  
und ± 10 % (> 30–60 mmHg)
- ▶ Dieses Gerät ist elektrisch vom Typ BF Schockschutz
- ▶ Wiederholgenauigkeit (Variationskoeffizient): < 8 %
- ▶ Anzeigegenauigkeit: 1 mmHg
- ▶ Gewicht: 140 g (ohne Batterien), 230 g (mit 4x AA-Batterien)
- ▶ Maße (in mm):  
L 215 x B 24–29 x H 35–95

**173620**

## Tonometrie

# ZUBEHÖR für Icare® TONOVET Plus

Das neue Icare® TONOVET Plus ist noch einfacher zu bedienen. Es verfügt über eine erweiterte Benutzeroberfläche mit einem klareren, größeren Display. Rot/grüne Positionslichter helfen, im richtigen Winkel in die Mitte der Hornhaut zu zielen. Nach sechs Messungen berechnet das TONOVET Plus den endgültigen Augeninnendruck (IOP) und speichert diesen im Gerät ab.



**EINWEG-PRÜFTIPS  
FÜR TONOVET PLUS**

► Packung mit 100 Stück  
**1736006**



**PRÜFTIPEINSATZ  
FÜR TONOVET PLUS**

**E173600701**



**MANSCHETTE  
FÜR PRÜFTIPEINSATZ**

**E173600702**




**STÄNDER  
FÜR TONOVET PLUS**

► Tisch und Wandbefestigung  
**1736008**



**SILIKON-GRIFFHÜLSE  
FÜR TONOVET PLUS**

► Grün  
**E173600703**

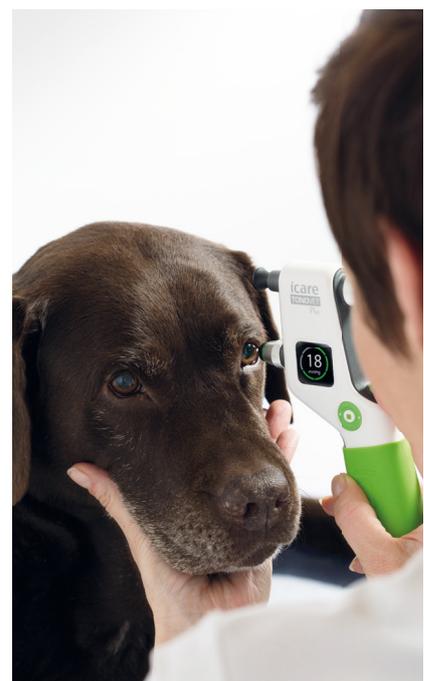

Anwendung TONOVET Plus an einem Labrador