

veterinary technology for life

Eickemeyer®

www.eickemeyer.de

Telefon +49 7461 96 580 0

OrthoVet PRO

Akku-Bohrmaschine



Modular,
handlich,
kabellos

ORTHOVET PRO AKKU-BOHRMASCHINE – KOMPONENTEN

Das ideale Instrument für die Kleintier-Osteosynthesebehandlung


Die OrthoVet PRO Akku-Bohrmaschine ist ein akkubetriebenes Motorensystem für die veterinärmedizinische Osteosynthese in der Kleintierchirurgie. Das modulare System besteht aus einem Handstück mit bürstenlosem Motor und vier Aufsätzen, die durch eine schlüssellose Schnellkupplung auch intraoperativ in nur wenigen Sekunden gewechselt werden können.

Das Handstück, das Schnellspannfutter und das Jacobs-Bohrfutter sind kanuliert. Somit können kanulierte Schrauben oder Bohrer auch über lange Führungsdrähte stufenweise nachgeführt werden, ohne dass der Führungsdraht gekürzt werden muss. Die Oszillierende Säge verfügt über eine fünffach verstellbare, variable Fixierung des Sägeblattes und erlaubt dem Operateur einen optimierten Blick auf das OP-Feld. Das AO-Schnellspannfutter komplettiert das System und macht die OrthoVet PRO zu einem echten Multitalent.

Handstück und Aufsätze können sterilisiert / autoklaviert werden. Der Li-Ion-Akku ist nicht autoklavierbar und wird mit Hilfe eines Trichters ins Handstück eingesetzt. Der stufenlose Betrieb ist im Rechts- und Linksgang sowie mit dem Sägeaufsatz im Oszillations-schneidebetrieb möglich.



195001

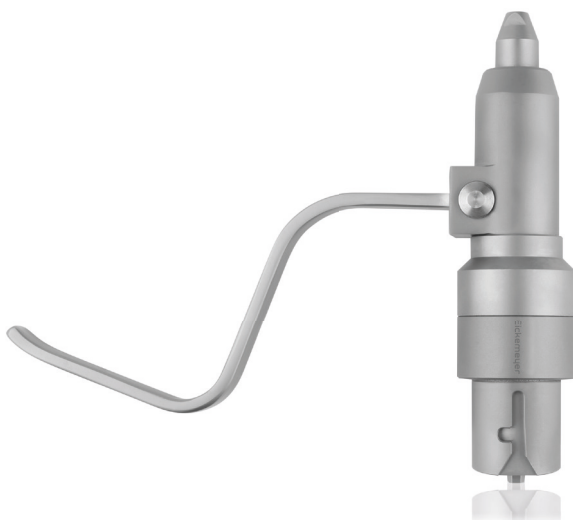

195003



195002



195004



195005

ORTHOVET PRO AKKU-BOHRMASCHINE – EIGENSCHAFTEN

Eine 5-fach verstellbare, variable Fixierung des Sägeblatts in deren Aufnahme erlaubt dem Operateur einen optimierten Blick auf das OP-Feld (Abb. 1).

Die OrthoVet PRO Akku-Bohrmaschine kann mittels „Trigger“ am Handstück stufenlos betrieben werden, in Geschwindigkeiten von 0–1.200 U/min bzw. 0–16.000 osc./min.

Handstück und Aufsätze können sterilisiert / autoklaviert werden. Hierfür steht optional ein Sterilisationstray (Art. Nr. 195087) passend zum optionalen Sterilisationscontainer (Art. Nr. 185555) zur Verfügung.

Der Akku (Art. Nr. 195007) darf nicht sterilisiert / autoklaviert werden! Er wird über einen Trichter ins Handstück eingesetzt.

Näheres zur Handhabung und Wiederaufbereitung entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.


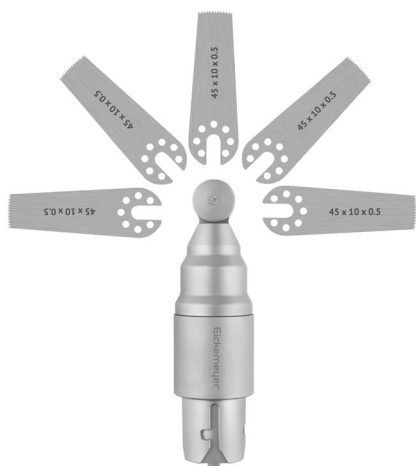



Abbildung 1



185555

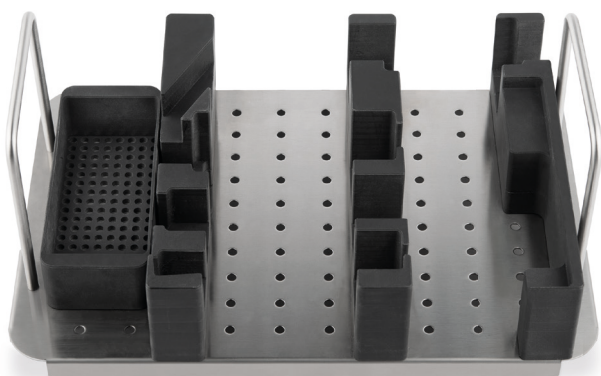

195087

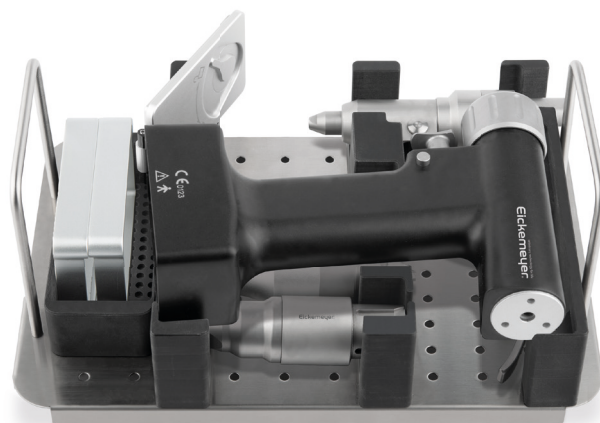

Anwendung

ORTHOVET PRO AKKU-BOHRMASCHINE – ARTIKELLISTE

OrthoVet PRO Akku-Bohrmaschine		
Art. Nr.	Beschreibung	Anzahl
195000	OrthoVet PRO Akku-Bohrmaschine, bestehend aus:	
195001	OrthoVet PRO Handstück, ohne Aufsätze und Akku	1
195002	OrthoVet PRO Jacobs-Bohrfutter-Aufsatz, Spannbereich Ø 0,6 – 2,5 mm	1
195003	OrthoVet PRO Schnellspannfutter für KIRSCHNER-Drähte, Spannbereich Ø 0,6 – 2,5 mm	1
195004	OrthoVet PRO Schnellspannfutter für AO-Aufsätze	1
195005	OrthoVet PRO Aufsatz oszillierende Säge	1
195006	OrthoVet PRO Akku-Ladegerät	1
195007	OrthoVet PRO Akku	2
195084	OrthoVet PRO Schlüssel für Jacobs-Bohrfutter-Aufsatz	1
195008	OrthoVet PRO Trichter für Handstück	2
195010	OrthoVet PRO Transportkoffer, Metall, Maße (in mm): L 390 x B 290 x H 120	1
195030	Sägeblatt mit AESCULAP-Aufnahme, Maße (in mm): L 40 x B 15 x H 0,5	1
195040	Sägeblatt mit AESCULAP-Aufnahme, Maße (in mm): L 40 x B 5 x H 0,5	1
195050	Sägeblatt mit AESCULAP-Aufnahme, Maße (in mm): L 30 x B 7 x H 0,5	1
195060	Sägeblatt mit AESCULAP-Aufnahme, Maße (in mm): L 50 x B 14 x H 0,5	1

Optionales Zubehör		
Art. Nr.	Beschreibung	Anzahl
196130	Sägeblatt mit AESCULAP-Aufnahme, Maße (in mm): L 50 x B 6,5 x H 0,5	1
196140	Sägeblatt mit AESCULAP-Aufnahme, Maße (in mm): L 50 x B 8 x H 0,5	1
196150	Sägeblatt mit AESCULAP-Aufnahme, Maße (in mm): L 45 x B 10 x H 0,5	1
196165	Sägeblatt mit AESCULAP-Aufnahme, Maße (in mm): L 39 x B 13 x H 0,5	1
196170	Sägeblatt mit AESCULAP-Aufnahme, Maße (in mm): L 58 x B 10 x H 0,5	1
196180	Sägeblatt mit AESCULAP-Aufnahme, Maße (in mm): L 64 x B 10 x H 0,5	1
196190	Sägeblatt mit AESCULAP-Aufnahme, Maße (in mm): L 70 x B 14 x H 0,5	1
195087	OrthoVet PRO Sterilisations-Tray für Akku-Bohrmaschine, leer	1
185555	Container, Wanne ungelocht, inkl. gelochtem Deckel, silber, Maße (in mm): L 312 x B 183 x H 122	1
563706	AESCULAP Ölspray STERILIT, mit Schmier- und Korrosionsschutz, 300 ml	1
195011	OrthoVet PRO Reinigungsbürste, Ø 4,0 mm, Länge 350 mm, Packung mit 3 Stück	1