



Evolox® TPLO Polyaxiale
Limited Contact
Verriegelungsplatte


veterinary technology for life
Eickemeyer®

Sichere Fixation



Evolox® TPLO Polyaxiale Limited Contact Verriegelungsplatte

Das Evolox® Platten-System in konischer Dreiecksgewinde-Lochform führt das Gewinde der Schraube von einer zur nächsten Gewindestufe, wobei die Steifigkeit der Verriegelung erhöht wird. Die Verriegelungsschrauben können in situ polyaxial kranial und kaudal in alle Richtungen in einem Winkel von +10° bis -10° fixiert werden. Die proximale Schraube ist jedoch unidirektional zu verriegeln.

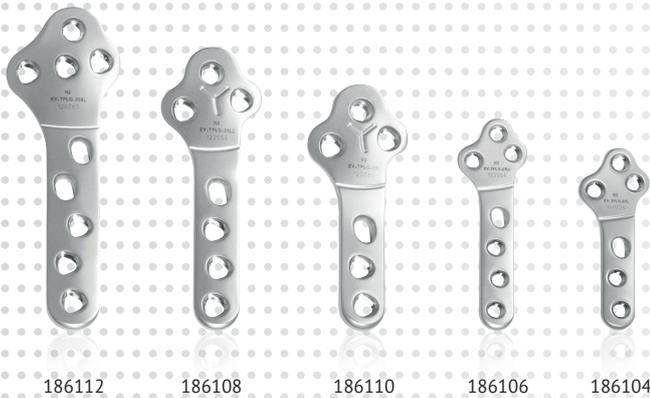

Abbildungen ähnlich

- ▶ Konische Dreiecksgewindeform ermöglicht eine sichere polyaxiale Schrauben-/ Plattenverbindung
- ▶ Limitierter Knochenkontakt durch die Kontur der Plattenunterseite und damit Verbesserung der vaskulären Versorgung
- ▶ Lowprofil und abgerundete Ecken
- ▶ Anatomisch vorgeformt: quer zur Platte verlaufende Riefen ermöglichen dem Arzt das Biegen der Platte in situ
- ▶ Satinierte Platten-Oberflächen reduzieren die Spiegelung des OP-Lichts
- ▶ Üblicherweise beginnt man die Plattenfixation mit mindestens einer Verriegelungsschraube und verwendet in den Gleitlöchern Corticalisschrauben.
- ▶ Aus Implantatstahl
- ▶ Mit hochglanzpolierten Gewinden
- ▶ Mit Fixationsloch für 1,2 mm-KIRSCHNER Bohrdraht

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T 07461 96 580 0
F 07461 96 580 90
E info@eickemeyer.de

TELEFON 07461 96 580 0
www.eickemeyer.de



Evolox® TPLO Polyaxiale
Limited Contact
Verriegelungsplatte


veterinary technology for life
Eickemeyer®

Sichere Fixation



3 + 3-Loch, Länge (in mm): 39

Rechts	Links
186101	186102

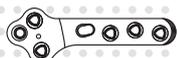



3 + 3-Loch, Länge (in mm): 46

Rechts	Links
186103	186104




3 + 4-Loch, Länge (in mm): 54

Rechts	Links
186105	186106

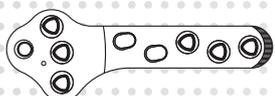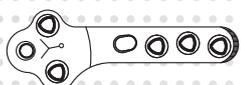


3 + 3-Loch, Länge (in mm): 64

Rechts	Links
186107	186108

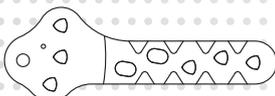

3 + 4-Loch, Länge (in mm): 74

Rechts	Links
186109	186110

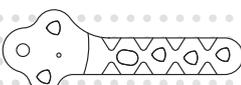

4 + 5-Loch, Länge (in mm): 85

Rechts	Links
186111	186112



EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T 07461 96 580 0
F 07461 96 580 90
E info@eickemeyer.de

TELEFON 07461 96 580 0
www.eickemeyer.de