


ULTRASCHALL MAGIC 6000 PLUS

Variabel & praktisch

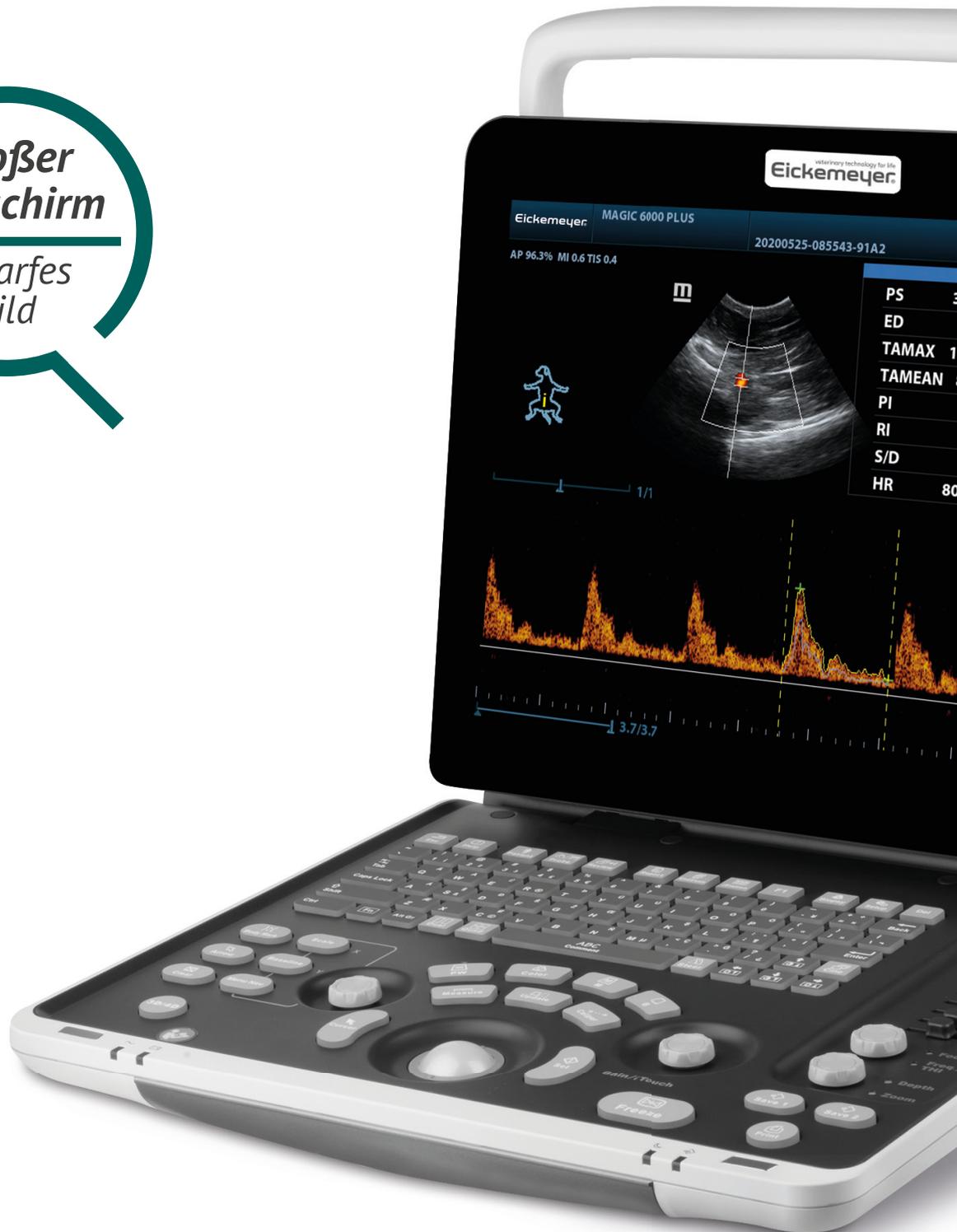

Ultraschall

VARIABEL & PRAKTISCH MAGIC 6000 PLUS

Wir beobachten die Arbeit der Tierärzte in der Praxis und entwerfen Geräte, die sich den Bedürfnissen unserer Kunden anpassen. Das MAGIC 6000 PLUS sorgt mit seiner leistungsfähigen Hardware und ihrer hohen Anzahl an Bildeinstellungsparametern für eine überragende Auflösung.



Gute Bildauflösung

Moderne und benutzerfreundliche Anwendungen helfen Ihnen bei der Erstellung eines optimalen Bildes. Durch den großen Bildschirm wird Ihnen die Bilddarstellung auch bei größerer Arbeitsentfernung vereinfacht.

Einfach archivieren

Sie können Ihre Bilder, Clips und Berichte einfach an den Praxisrechner übertragen und via iStation™ leicht erneut auf dem Gerät aufrufen.

Mehr Zeit für Ihre Patienten

Durch den hohen Komfort bei Anwendung und Aufbereitung der Daten sparen Sie kostbare Zeit für Ihre Patienten. Der zweite Sondenanschluss ermöglicht Ihnen einen raschen und einfachen Sondenwechsel ohne lästiges Umstellen während der Untersuchung.

„Das MAGIC 6000 PLUS ist in meiner Gemischtpraxis sowie im mobilen Dienst ein verlässlicher Begleiter. Mit ihm kann ich kleine wie große Patienten sicher befunden.“

Gewicht: 8 kg



ULTRASCHALL MAGIC 6000 PLUS

Anwendungsbereiche

- ▶ Kleintiere: Abdomen
- ▶ Heimtiere: Abdomen
- ▶ Pferde: Gynäkologie, Orthopädie

Einstellhilfen für optimales Arbeiten

- ▶ iStation™: einfache Patientendaten- und Befundverwaltung
- ▶ iClear™: optimierte Bildauflösung
- ▶ iZoom™: Vollbildmodus
- ▶ iBeam™: verbesserte Bildauflösung in Echtzeit
- ▶ iTouch™: automatische Gain-Einstellung
- ▶ 8-fache TGC: manueller Ausgleich der Signalstärke über die gesamte Eindringtiefe
- ▶ PW-, Power-Doppler und „Auto Trace“
- ▶ Farbdoppler optional

Besondere Features

- ▶ Vet-Software (Bodymarks, Trächtigkeitsmessung)
- ▶ Tastatur abwaschbar



Technische Daten

- ▶ LCD-Monitor, 38 cm Diagonale, kippbar
- ▶ Bildexport in Windowsformate (DICOM/DICOM Worklist optional)
- ▶ Interner Speicher (320 GB/ entspricht ca. 500.000 Bildern)
- ▶ Lange Akkulaufzeit von bis zu 2 Stunden (optional)
- ▶ 2 Sondenanschlüsse
- ▶ 4 USB-Anschlüsse
- ▶ Abmessungen (in cm):
B 36 x H 36 x T 15

303740

Ultraschall

ZUBEHÖR FÜR MAGIC 6000 PLUS

Schallkopftechnologie mit einer überragenden Bildqualität. Unsere Schallköpfe sind in mehreren Ausführungen erhältlich, sodass wir Ihnen stets eine Lösung anbieten können, die die Anforderungen Ihres Fachgebiets erfüllt.



SCHALLKOPF MIKRO-KONVEX

- ▶ Frequenzbereich: 5,0–8,5/
 H8,0/H9,0 MHz

303710



SCHALLKOPF KONVEX

- ▶ Frequenzbereich: 2,0–5,0/
 H5,0/H6,0 MHz

303716



SCHALLKOPF LINEAR T-FÖRMIG

- ▶ Frequenzbereich: 5,0–10,0/
 H8,0/H10,0 MHz

303711



SCHALLKOPF LINEAR REKTAL

- ▶ Frequenzbereich: 4,0–7,0/
 H6,0/H7,0 MHz

304021

TASCHE FÜR MAGIC 6000 PLUS

- ▶ Für den sicheren Transport im
 mobilen Einsatz


303725



GERÄTEWAGEN FÜR MAGIC 6000 PLUS

- ▶ Leichte Bewegung innerhalb des
 Behandlungszimmers

303741

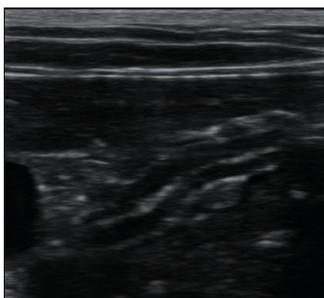

Untersuchung des Duodenums eines kleinen Hundes mit einem linearen Schallkopf

AKKU FÜR MAGIC 6000 PLUS

- ▶ Für 120 Minuten netzunabhängigen
 Betrieb

303721