

ULTRASCHALL VETUS 5

Preiswert & effizient



Ultraschall

PREISWERT & EFFIZIENT VETUS 5

Das Vetus 5 schafft mit Full-HD-Auflösung klare Bilder für alle Fragestellungen der Abdomendiagnostik.

**Preis-
günstig**

**Farb-
doppler**

Sehr gute HD-Bildqualität

Einzigartige Full-HD-Auflösung in dieser Geräteklasse.

Einfach archivieren

Bilder und Berichte können Sie einfach und schnell an den Praxisrechner übertragen und sind via iStation™ sofort erneut aufrufbar.

Effizientes Arbeiten

Sie profitieren von den vielfältigen Anwendungen, die Ihnen ein breites Spektrum im Bereich Abdomen bieten. Der große, integrierte Touchscreen (34 cm) lässt eine bequeme und intuitive Gerätesteuerung zu.

„Mit den verbesserten technischen Möglichkeiten des Vetus 5 bin ich in meiner Kleintierpraxis in der Abdomendiagnostik hervorragend ausgestattet.“

funktional



ULTRASCHALL VETUS 5

Anwendungsbereiche

- ▶ Kleintiere: Abdomen
- ▶ Heimtiere: Abdomen

Einstellhilfen für optimales Arbeiten

- ▶ iStation™: einfache Patientendaten- und Befundverwaltung
- ▶ iClear™: optimierte Bildauflösung
- ▶ iZoom™: Vollbildmodus
- ▶ iBeam™: verbesserte Bildauflösung in Echtzeit
- ▶ iTouch™: automatische Gain-Einstellung
- ▶ 8-fache TGC: manueller Ausgleich der Signalstärke über die gesamte Eindringtiefe
- ▶ THI und PSH: Reduktion von Artefakten und verbesserte Kontrastauflösung
- ▶ Farb-, PW-, Power-Doppler

Besondere Features

- ▶ Rohdatenverarbeitung möglich
- ▶ Geschützte, ausziehbare Tastatur
- ▶ Bildschirm um 180° schwenkbar



Technische Daten

- ▶ LED-Monitor, Full-HD, 55 cm Diagonale, mit Gelenkarm
- ▶ Zusätzlicher Touchscreen, 34 cm Diagonale
- ▶ Bildexport in Windowsformate (DICOM Send, DICOM Worklist optional)
- ▶ Großer interner Speicher: 1 TB (entspricht ca. 1 Mio. Bildern)
- ▶ 4 Sondenanschlüsse
- ▶ Abmessungen (in cm): B 54,3 x H 113 x T 81
- ▶ Inkl. 2 Sonden 6C2, 7L4B

305050

Ultraschall

ZUBEHÖR FÜR VETUS 5

Schallkopftechnologie mit einer überragenden Bildqualität. Unsere Schallköpfe sind in mehreren Ausführungen erhältlich, sodass wir Ihnen stets eine Lösung anbieten können, die die Anforderungen Ihres Fachgebiets erfüllt.



SCHALLKOPF MIKRO-KONVEX

- ▶ Modell 6C2
- ▶ Frequenzbereich: 2,6–13,2 MHz
- ▶ Im Lieferumfang enthalten



SCHALLKOPF LINEAR T-FÖRMIG

- ▶ Modell 7L4B
- ▶ Frequenzbereich: 3,0–14,0 MHz
- ▶ Im Lieferumfang enthalten




DICOM WORKLIST FÜR VETUS GERÄTE

- ▶ Für Vetus 5 / 5 Expert / 7
305072



Darstellung der Blase im B-Mode mit Distanzmessung

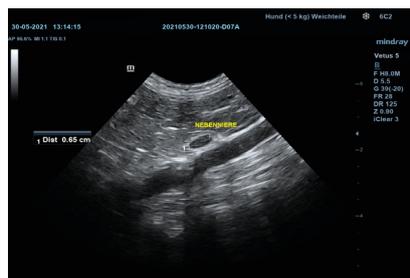

Darstellung der Nebenniere im B-Mode