



DigiVet® CR PREMIUM  
Dental Reader

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

# Qualitätsröntgenbilder – schnell und digital

## DigiVet® CR PREMIUM Dental Reader

Der kompakte, benutzerfreundliche dentale CR Reader für schnelle und qualitativ hochwertige digitale Röntgenbilder – jetzt auch für Speicherfolien der Größe 4 geeignet

Der automatisierte Magneteinzug mit „Push-and-Go“-Funktion macht die Erstellung von Bildern kinderleicht – auch bei ungeübten Anwendern. Im Starter-Paket sind die 3 wichtigsten Speicherfolien-Größen für das dentale Röntgen in der Tierarztpraxis enthalten. Durch die integrierte Löschroutine wird ein zusätzliches Gerät zum Löschen von Speicherfolien vor einer Wiederverwendung überflüssig.

- ▶ Kann aufgrund seines kompakten Formates selbst in kleinste Tierarztpraxen und Behandlungsräume integriert werden
- ▶ Vorhandene Röntgengeräte können verwendet werden
- ▶ Mit der Bildvorschau auf dem Bildschirm des Readers kann die Bildqualität leicht überprüft werden
- ▶ Einfache Anwendung: der Benutzer wird Schritt für Schritt auf dem Bildschirm durch das bildgebende Verfahren geführt – aufwändige Schulungen entfallen
- ▶ Selbstkalibrierung für Stabilität und Langzeit-Performance


### Benutzerfreundliche Bildgebungssoftware

Mit der inkludierten Bildgebungssoftware werden die Erfassung und Verwaltung von Bildern optimiert. Die benutzerfreundliche Software unterstützt wirtschaftliche Workflows in Tierarztpraxen und erfordert wenig Einarbeitung: Um sicherzustellen, dass die Scans den richtigen Positionen zugeordnet werden, wählt der Bediener einfach den betreffenden Zahn auf dem Zahnschema der Software aus.

### Lieferumfang

- ▶ DigiVet® CR PREMIUM Dental Reader
- ▶ Starterset Speicherfolien: 4x Größe 2 (31 x 41 mm), 1x Größe 4c (48 x 54 mm), 1x Größe 4 (54 x 76 mm)
- ▶ 100 Hygiene-Hüllen Größe 2
- ▶ 100 Hygiene-Hüllen Größe 4c
- ▶ 100 Hygiene-Hüllen Größe 4
- ▶ DigiVet® Dental Vet Imaging Software Paket inklusive DICOM Modalitäten (Send/Retrieve)

708036

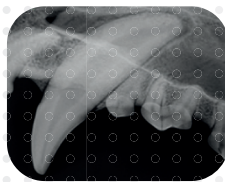

Anwendungsbeispiel



**EICKEMEYER®**  
Eltastraße 8  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

T +49 7461 96 580 0  
F +49 7461 96 580 90  
info@eickemeyer.de

**TELEFON +49 7461 96 580 0**  
[www.eickemeyer.de](http://www.eickemeyer.de)